



HESS Stretcher-Matratzen



Hess

Die Argumente für HESS-Matratzen

Suchen Sie eine Polsterwerkstatt, die nicht nur die Polster Ihrer Patientenliegen sowie die Matratzen Ihrer Patientenstretcher, Spital- und Pflegebetten auf Vordermann bringt und alles nach Ihren Vorstellungen herstellt, sondern Ihnen einen echten Mehrwert bietet? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Unsere hauseigene Polsterwerkstatt beherrscht das Handwerk der Polsterei wie keine Zweite. In Kombination mit der Verarbeitung von qualitativ hochwertigen Materialien entsteht ein echter Mehrwert für Sie. Ergänzend zu unserem grossen Standard-Sortiment liegt eine unserer besonderen Stärken in individuell gestalteten Polstern und Matratzen mit vielfältigen Überzügen und Füllungen, die exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmt sind.

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Reparaturarbeiten und Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen.

Warum Sie sich für Matratzen der HESS Medizintechnik entscheiden sollen?

- ✓ **Individuelle Fertigung**

HESS Stretcher- und Transfer-Matratzen können auf Wunsch nach Ihren Vorgaben produziert werden

- ✓ **Langlebiger, fortschrittlicher Matratzenüberzug**

Der Überzug besteht aus PU (polyurethanbeschichtetes Nylongewebe). Polyurethan ist ein innovatives Material, das atmungsaktiv und trotzdem absolut dicht gegen Bakterien, Viren, Urin, Blut und weitere Flüssigkeiten ist. Durch die hohe Wischdesinfektionsfestigkeit bleibt der Überzug lange geschmeidig, zudem ist er Waschmaschinenfest bis 95°C und kann im Tumbler (60°C) getrocknet werden. Die bielastische Funktion des Überzugs verhindert Faltenbildung und gewährleistet optimale Weitergabe und Verteilung des Spitzendrucks an den Matratzen Kern.



Stretcher-Matratzen im Fokus

- ✓ **Antislip-Material**

Die Unterseite jeder HESS Transfer- und Stretcher-Matratze kann mit Antislip-Material versehen werden, um der Matratze einen besseren Halt auf dem Stretcher zu verleihen.

- ✓ **Verschiedene Härtegrade**

Unterschiedliche Härtegrade ermöglichen eine individuelle Anpassung des Liegekomforts – auch bei längerem Aufenthalt.

- ✓ **Separater Überzug und Matratzenkern**

Der innovative Überzug ist mit einem verdeckten Reissverschluss ausgerüstet. So können Sie den Matratzenüberzug oder den Matratzen-Kern separat auswechseln. Dadurch sparen Sie Kosten und Zeit.

- ✓ **Sicherheit**

Die Matratzen entsprechen einer der höchsten Brandschutzklassen (BS 7175: 1989 Crip 7) und sind nicht entflammbar. Polyurethanüberzüge (PU) bleiben länger geschmeidig und somit dicht gegen das Eindringen von Körperflüssigkeiten in den Matratzen-Kern als PVC-Überzüge, die deutlich schneller spröde werden.

- ✓ **Kurze Lieferzeit**

alle HESS Stretcher- und Transfer-Matratzen sind innerhalb einer Woche bei Ihnen..



Obermaterial / Überzug für höchste Hygiene und Komfort

Das Polyurethan-Textil für Matratzenhüllen im Medizinalbereich gilt als eines der führenden Materialien und überzeugt durch zahlreiche hochwertige Eigenschaften für den professionellen Einsatz im Gesundheitswesen.
Überzeugen Sie sich:

Eigenschaften

Waschbar
Atmungsaktiv
Wasserdicht
Biokompatibilität
Antibakteriell
Nichtenflammbar
Ökotex 100
Elastizität
Jungle Test
REACH

Ergebnis


bis 95°C
> 800g/m²/24h
> 2000 mm
EN ISO 10.993-5 und 10
Sanitized behandelt
BS 7175 : 1989 Crip 7
Klasse 1
Biflextechnologie
Qualität nach 3 Wochen gleich
Nach Verordnung 2013-11234

Beschreibung

Mikrobenfrei nach waschen
Bessere Wärmeregulierung
Schützt Matratze vor Flüssigkeiten
keine Hautirritation und Allergien
Bakterien abtötend
Eine der höchsten Brandschutzklasse
Textilien für Babys und Kleinkinder
Beste Anpassungseigenschaften
Kein Qualitätsverlust bei Extremklima
Material enthält keine Schadstoffe




Die Features der HESS-Matratten

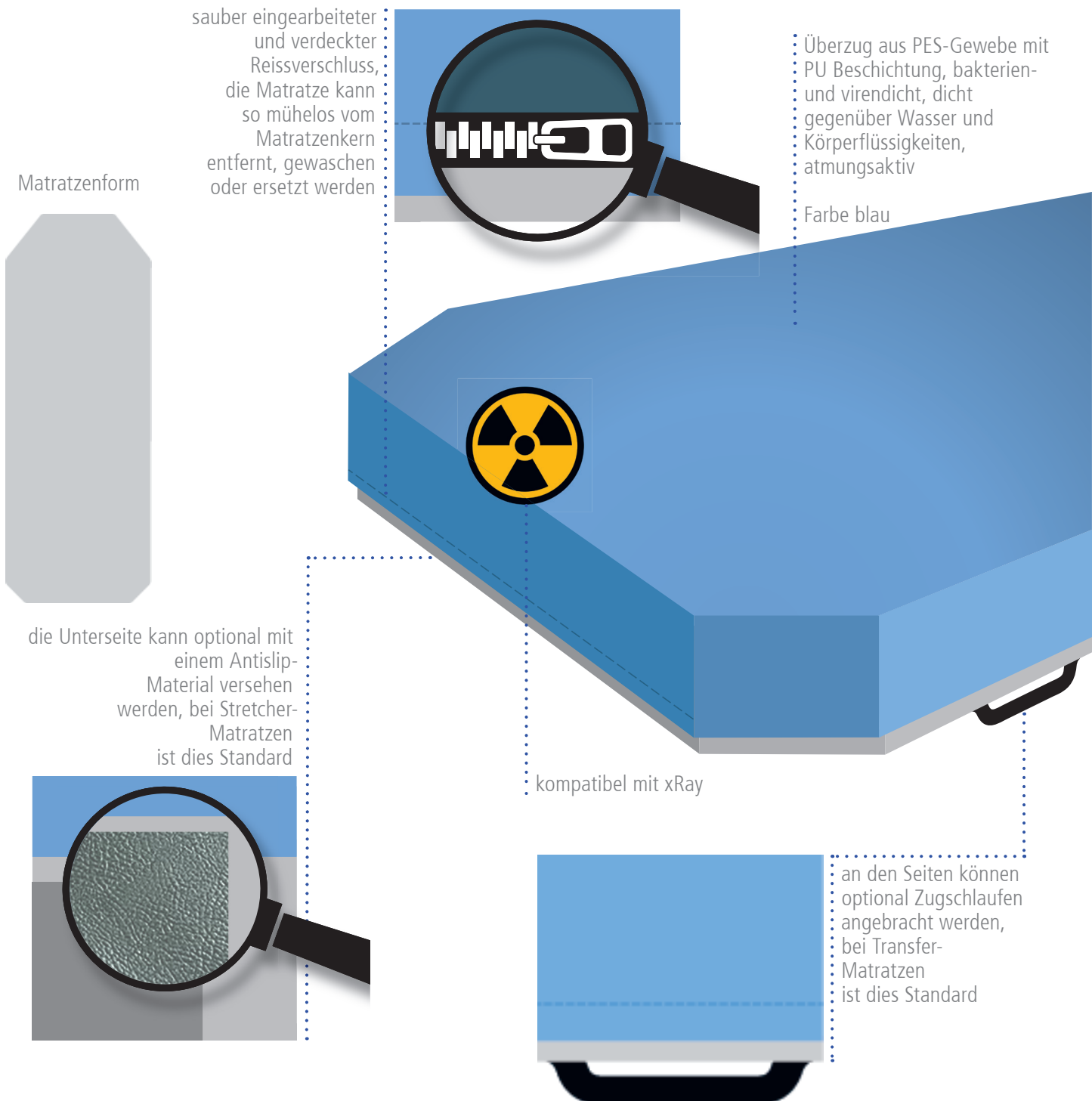

Stretcher-Matratze «Soft»

Härtegrad 1

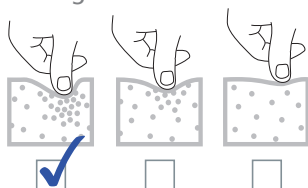


Patientengewicht




Neben dem Patientengewicht, hat auch die Liegedauer einen Einfluss auf die Wahl des optimalen Matratzenkerns.

Einfachkern bis 7.5 cm

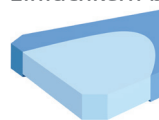

Doppelkern ab 10 cm

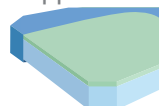

Legende:

PU = Polyurethan
PES = Polyester
HT = High Tenacity

Auflage «Soft»
für weiches liegegefühl

Unterseite aus Antislip-Material,
beschichtetes PES-Gewebe mit
aufgenähtem Hakenband als
optimale Rutschsicherung


Matratzenkern aus
qualitativ hochwertigem
Kaltschaum für eine
hohe Lebensdauer

Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
ST-HE200.001	Stretcher-Matratze Soft	190	66	7.5
ST-HE200.009	Stretcher-Matratze Soft xRay ☢	190	66	7.5
ST-HE200.002	Stretcher-Matratze Soft	190	66	10
ST-HE200.007	Stretcher-Matratze Soft	203	66	10
ST-HE200.003	Stretcher-Matratze Soft	190	66	12.5
ST-HE200.004	Stretcher-Matratze Soft	190	76	7.5
ST-HE200.010	Stretcher-Matratze Soft xRay ☢	190	76	7.5
ST-HE200.005	Stretcher-Matratze Soft	190	76	10
ST-HE200.008	Stretcher-Matratze Soft	203	76	10
ST-HE200.006	Stretcher-Matratze Soft	190	76	12.5

Stretcher-Matratze «Comfort»

Härtegrad 2 (Standard)

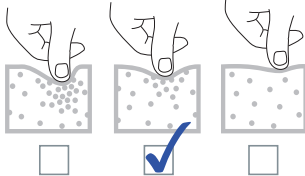

Patientengewicht




Neben dem Patientengewicht, hat auch die Liegedauer einen Einfluss auf die Wahl des optimalen Matratzenkerns.


Unterseite aus Antislip-Material, beschichtetes PES-Gewebe mit aufgenähtem Hakenband als optimale Rutschsicherung

Matratzenkern aus qualitativ hochwertigem Kaltschaum für eine hohe Lebensdauer

Einfachkern bis 7.5 cm

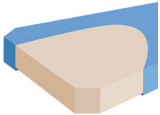

Doppelkern ab 10 cm

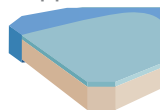

Legende:


PU = Polyurethan
PES = Polyester
HT = High Tenacity

Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
ST-HE200.110	Stretcher-Matratze Comfort	190	66	5
ST-HE200.101	Stretcher-Matratze Comfort	190	66	7.5
ST-HE200.111	Stretcher-Matratze Comfort xRay	190	66	7.5
ST-HE200.102	Stretcher-Matratze Comfort	190	66	10
ST-HE200.103	Stretcher-Matratze Comfort	190	66	12.5
ST-HE200.108	Stretcher-Matratze Comfort	190	76	5
ST-HE200.104	Stretcher-Matratze Comfort	190	76	7.5
ST-HE200.112	Stretcher-Matratze Comfort xRay	190	76	7.5
ST-HE200.105	Stretcher-Matratze Comfort	190	76	10
ST-HE200.107	Stretcher-Matratze Comfort	203	76	10
ST-HE200.106	Stretcher-Matratze Comfort	190	76	12.5

Stretcher-Matratze «Medium»

Härtegrad 3

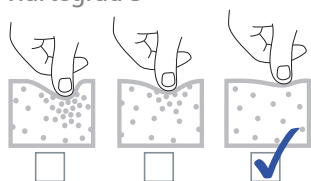


Patientengewicht



Neben dem Patientengewicht, hat auch die Liegedauer einen Einfluss auf die Wahl des optimalen Matratzenkerns.


Auflage «Medium»
für optimalen Kompromiss

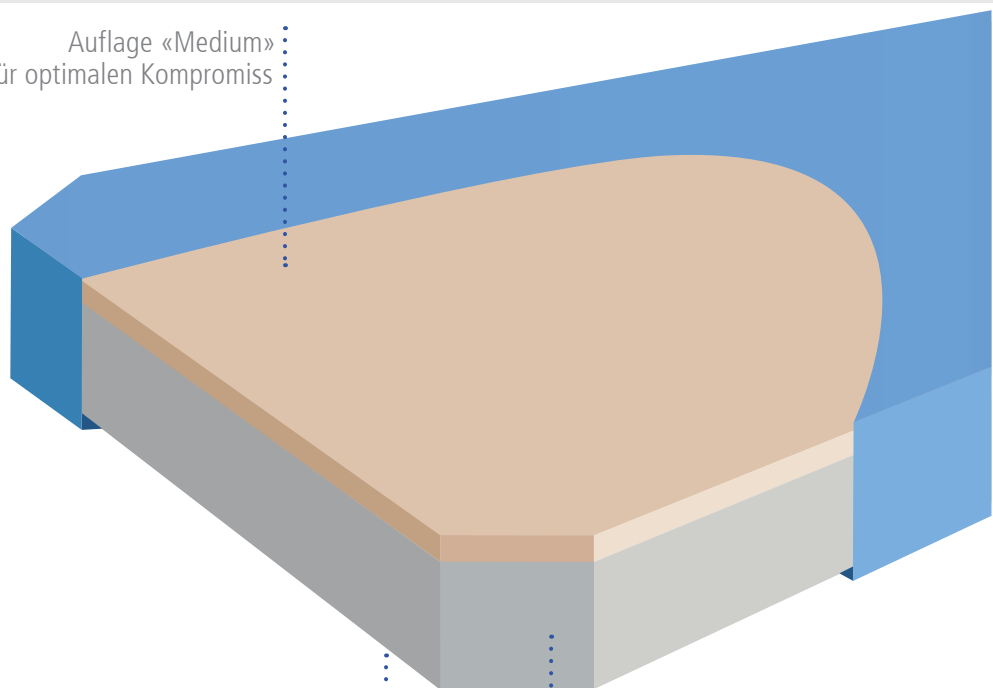


Unterseite aus Antislip-Material,
beschichtetes PES-Gewebe mit
aufgenähtem Hakenband als
optimale Rutschsicherung

Matratzenkern aus
qualitativ hochwertigem
Kaltschaum für eine hohe
Lebensdauer

Einfachkern bis 7.5 cm

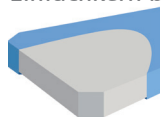

Doppelkern ab 10 cm

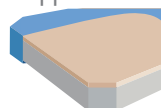

Legende:

PU = Polyurethan

PES = Polyester


HT = High Tenacity

Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
ST-HE200.201	Stretcher-Matratze Medium	190	66	7.5
ST-HE200.209	Stretcher-Matratze Medium xRay ☢	190	66	7.5
ST-HE200.202	Stretcher-Matratze Medium	190	66	10
ST-HE200.208	Stretcher-Matratze Medium	203	66	10
ST-HE200.203	Stretcher-Matratze Medium	190	66	12.5
ST-HE200.204	Stretcher-Matratze Medium	190	76	7.5
ST-HE200.210	Stretcher-Matratze Medium xRay ☢	190	66	7.5
ST-HE200.205	Stretcher-Matratze Medium	190	76	10
ST-HE200.207	Stretcher-Matratze Medium	203	76	10
ST-HE200.206	Stretcher-Matratze Medium	190	76	12.5

Transfer-Matratze «mSoft» (Memoryschaum)

mSoft-Härtegrad gewichtsabhängig

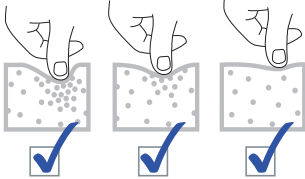


Doppelkern mit mSoft-Schnitt
Unterschiedliche Materialien mit
speziellem Kernschnitt ermöglichen
höchsten Liegekomfort für einen
grossen Gewichtsreich.
Leichte wie auch schwere Patienten
weden bei dieser Matratze sehr
weich und bequem gestützt

Patientengewicht




Neben dem Patientengewicht, hat
auch die Liegedauer einen Einfluss
auf die Wahl des optimalen
Matratzenkerns.

Legende:
PU = Polyurethan
PES = Polyester
HT = High Tenacity

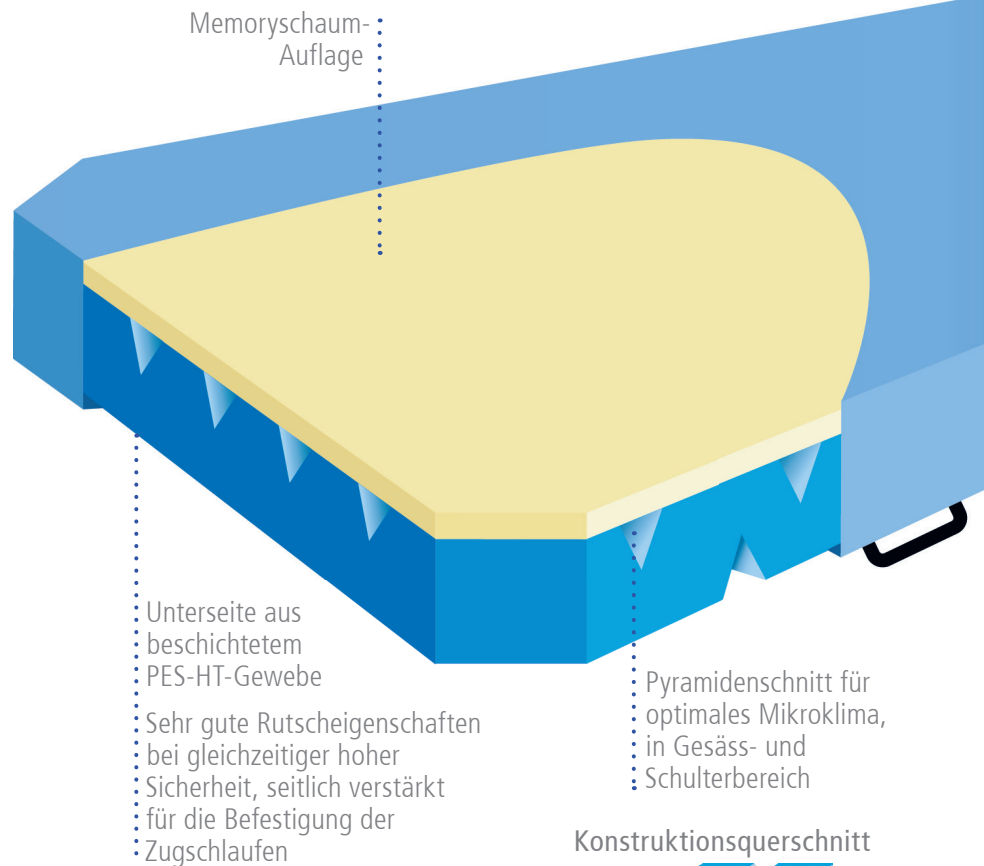

Konstruktionsquerschnitt

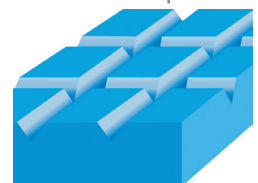


Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
ST-HE201.301	Transfer-Matratze mSoft	190	66	7.5
ST-HE201.306	Transfer-Matratze mSoft xRay ☢	190	66	7.5
ST-HE201.302	Transfer-Matratze mSoft	190	66	10
ST-HE201.304	Transfer-Matratze mSoft	190	76	7.5
ST-HE201.307	Transfer-Matratze mSoft xRay ☢	190	76	7.5
ST-HE201.305	Transfer-Matratze mSoft	190	76	10
ST-HE500	Antislip für Transfer-Matratze			

Transfer-Matratze «Comfort»

Härtegrad 2

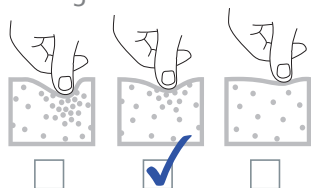


Patientengewicht




Neben dem Patientengewicht, hat auch die Liegedauer einen Einfluss auf die Wahl des optimalen Matratzenkerns.

Einfachkern bis 7.5 cm

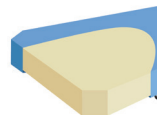


Doppelkern ab 10 cm

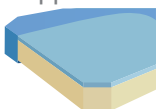

Legende:

PU = Polyurethan
PES = Polyester
HT = High Tenacity

Auflage «Comfort»
für optimalen Komfort

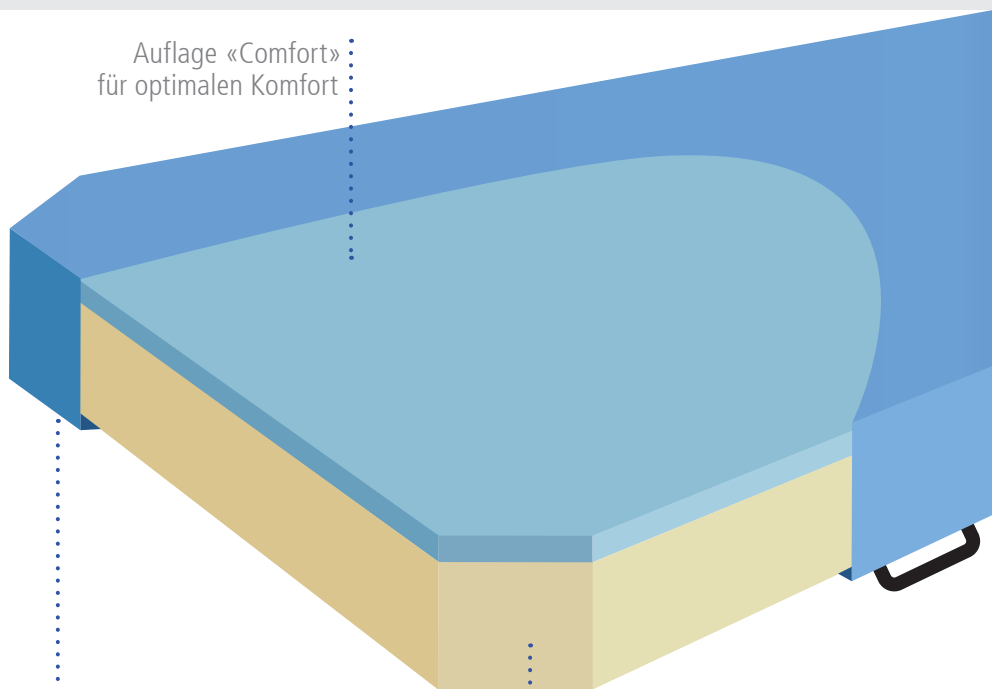

Unterseite aus beschichtetem
PES-HT-Gewebe
Sehr gute Rutscheigenschaften bei
gleichzeitiger hoher Sicherheit, seitlich
verstärkt für die Befestigung der
Zugschlaufen

Matratzenkern aus
qualitativ hochwertigem
Kaltschaum für eine hohe
Lebensdauer

Angaben in cm

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Dicke
ST-HE201.111	Transfer-Matratze Comfort	190	66	5
ST-HE201.112	Transfer-Matratze Comfort	190	66	7.5
ST-HE201.114	Transfer-Matratze Comfort xRay ☢	190	66	7.5
ST-HE201.113	Transfer-Matratze Comfort	190	66	10
ST-HE201.102	Transfer-Matratze Comfort	190	76	7.5
ST-HE201.104	Transfer-Matratze Comfort xRay ☢	190	76	7.5
ST-HE201.103	Transfer-Matratze Comfort	190	76	10
ST-HE500	Antislip für Transfer-Matratze			


Ausstattungs-Mobiliar



Matratzensicherungs-System
Flaschbänder ander Matratze

Variante

Standard	ST-ML100-003
xRay	ST-ML100-005

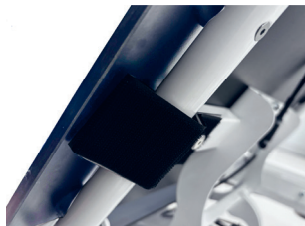

Matratzensicherungs-System
Hakenband am Stretcher

Variante

Standard	H12-500.027
xRay	H12-500.048



Art.-Nr. **H12-500.028**

Relax-Kissen Orion®
mit Klettverschluss

Länge	40 cm
Breite	30 cm
Dicke	12 cm



Art.-Nr. **ST-K00035**

Zusätzliche Zugschlaufen
Aufpreis für 8 anstelle 4 Zuggriffe an Transfermatratzen. Jeweils 4 pro Längsseite bieten genügend Haltegriffe für einen Patiententransfer



HESS MultiLED 9
Untersuchungsleuchte

Variante

Deckenmontiert	H20-189.01
Wandmontiert	H20-189.02
Mobil	H20-189



Art.-Nr. **H03-117.009**

Paraventgestell mit Rollen

Überzug

blau	H03-118.006
gelb	H03-118.004
weiss	H03-118.002



Art.-Nr. **08069**

Variocar 60 Basiswagen

1 Schublade

Breite	60 cm
Höhe	73 cm
Tiefe	45 cm



Original HESS Boy
in diversen Abmessungen erhältlich, mit HPL oder Aluminium-Tablaren

Wenn es um die Einrichtung und Ausrüstung von Spitälern, Praxen und Pflegeheimen geht, sind wir Ihr kompetenter Partner. Vom Standard bis zur spezifischen Kundenlösung bekommen Sie alles aus einer Hand.

Beratung / Entwicklung / Verkauf / Service



HESS Medizintechnik AG

Grabenstrasse 14
CH-8865 Bilten
T +41 55 619 20 80
info@hess-med.ch
hess-med.ch

