
Tables d'examen



MULTiPRO[®] NEXT 
Se concentrer sur l'essentiel

Hess

Nous sommes le centre de compétences en Suisse pour Hôpital, thérapie et soins



Walter & Marco Zannier, directeur général & membre du comité de direction

Un partenaire solide

HESS est le centre de compétences pour la technique médicale. Outre les produits des principaux fabricants mondiaux, nous proposons également nos propres développements. Cela nous rend indépendants. Nous sommes ainsi en mesure de proposer des produits médicaux, de placer les besoins thérapeutiques et de soins au centre de nos réflexions et de nos actions. Nous harmonisons également les aspects financiers et juridiques.

Innovant et flexible

Nous misons sur la formation continue constante de nos collaborateurs. Ainsi, nous créons les conditions nécessaires pour que les médecins, les soignants et les thérapeutes puissent assurer leur service auprès des personnes. C'est notre vocation de répondre aux besoins spéciaux et aux souhaits des clients.

Fabriqué en Suisse

Une expérience depuis 1946 et un vaste savoir-faire - accumulé sur le chemin de l'entreprise artisanale à l'entreprise industrielle - HESS Medizintechnik AG. Prestations de service et produits maison made in Switzerland.

MULTIPRO[®] NEXT

Nous sommes fiers de la MultiPro[®] next !

Les tables d'examen innovantes sont une évolution logique de notre série de tables d'examen éprouvée. L'avantage pour le client est toujours au centre de nos préoccupations. Le design simple et minimaliste est dans l'air du temps -

Se concentrer sur l'essentiel !

**MultiPro[®] next -
une approche
cohérente
Développement
d'une technique
éprouvée !**

Ce qui nous caractérise

- La table d'examen MultiPro[®] next possède de grandes surfaces d'appui qui permettent l'entrée et la sortie des patients. Réalisée dans les revêtements souples. Avec le système breveté HESS Push-to-Stop, vous arrêtez la table d'examen en douceur en appuyant légèrement sur le pied et évitez ainsi d'endommager la table longue et le sol.
- Réglage en hauteur extra rapide et sans à-coups pour un travail efficace, grâce à la toute dernière technologie d'entraînement. Malgré cela, le moteur est très silencieux.
- Les entraînements électriques sont en outre très économiques en termes de consommation d'énergie.
- Les données de service peuvent être lues directement à partir des moteurs. Les irrégularités sont ainsi détectées et corrigées plus tôt. Nous mettons tout en oeuvre pour assurer la sécurité et la fiabilité de nos tables d'examen, afin que vous puissiez travailler sans souci.
- L'hygiène est importante pour vous - pour nous aussi ! Ainsi, vous ne trouverez pas d'arêtes, de creux ou de points de suintement inutiles sur le lit. Toutes les surfaces des tables d'examen MultiPro[®] next sont faciles et rapides à nettoyer. Les coussins le revêtement HPL et les couvertures de la base sont recouverts d'ions d'argent afin d'éviter la formation de germes et minimiser les risques. Dès la conception de la MultiPro[®] next, nous avons veillé à ce que l'hygiène soit prise en charge.

Vous pouvez compter sur nous

- Qualité HESS - Toutes les pièces de construction et de rembourrage sont haute qualité.
- Les coussins sont entièrement soudés et donc absolument étanches à tous les liquides. Grâce à cette technique de traitement unique, toutes les parties rembourrées de la MultiPro[®] next sont parfaitement hygiéniques.
- Délais de livraison rapides.
- La bonne qualité du service HESS - temps de réaction rapide et grande disponibilité des pièces de rechange.
- HESS propose le plus grand choix d'options et d'accessoires pour que vous puissiez profiter de la meilleure table d'examen pour votre travail. Des possibilités illimitées vous attendent.
- Possibilité de personnalisation et de fabrication spéciale.

La série MultiPro® next en un coup d'oeil

HESS Medizintechnik AG - un partenaire qui vous comprend

En tant que centre de compétences pour la technique médicale, HESS est votre interlocuteur. Hess partage avec vous et sans restriction son engagement sans réserve au service du patient. Depuis 1995, Weltklasse Zürich travaille avec des tables d'examen HESS. Ce n'est pas un hasard. Des équipes de pointe veillent à ce que des prestations de haut niveau soient fournies. L'association des savoir-faire des différents domaines permettra à de nouvelles solutions innovantes de voir le jour. Mais aujourd'hui déjà, les tables d'examen MultiPro® next sont parfaitement adaptées aux besoins des médecins et des thérapeutes ainsi qu'à ceux des patients.



MultiPro® la série de tables d'examen suisses - de renommée internationale

Depuis 1975, des hôpitaux, des cliniques, des hôpitaux UNI, des physiothérapies, des maisons de retraite et des centres de soins font confiance à notre entreprise. Les maisons de retraite et de soins ainsi que les cabinets médicaux font confiance aux tables d'examen de HESS Medizintechnik AG. Développée et produite en Suisse, la série MultiPro® next séduit par sa fonctionnalité sophistiquée et sa longévité. Tous les processus sont influencés par ce souci de qualité. Une plus-value est ainsi apportée à nos clientes et clients en toute confiance. Un suivi professionnel du client est alors essentiel. En étant à l'écoute du marché et en l'observant attentivement, nous captons les tendances et ainsi nos produits évoluent en permanence. Votre souhait est notre motivation. Depuis toujours, la marque HESS est synonyme de mobilier médical qui répond aux exigences et aux besoins des patients et aux attentes élevées des soignants, et ce, dans le monde entier. HESS Medizintechnik AG est un partenaire tout au long du cycle de vie du produit :

Conseil / Développement / Vente / Service.

MultiPro® next Tables pour patients

Page 12 à 33

Les tables pour patients de HESS Medizintechnik AG sont utilisées par les hôpitaux et les médecins pour les examens, les traitements et les thérapies. Vous trouverez la table MultiPro® next appropriée dans notre portefeuille. Grâce à diverses variantes et à de nombreux accessoires, les tables d'examen peuvent être adaptées à vos besoins et exigences individuels. Vous disposez ainsi d'un outil de travail optimal.

MultiPro® next divans de transport

Page 34 à 49

Si vous êtes dépendant de votre mobilité et ne souhaitez pas renoncer aux avantages d'un lit d'examen, de thérapie ou de traitement, alors le MultiPro® next Praktitrans est la solution qu'il vous faut. Adaptez votre lit de transport à vos besoins et à vos exigences grâce à notre large gamme d'accessoires.

EasyLine tables d'examen et de soins

Page 50 à 53

EasyLine est une table d'examen à hauteur fixe dont la qualité de fabrication n'a pas son pareil dans ce segment de prix. EasyLine est disponible en plusieurs hauteurs, pour que vous puissiez toujours travailler de manière ergonomique et confortable. Avec EasyLine, vous bénéficiez également de nombreux accessoires.

L'ergonomie L'être humain au centre

Pour vous ...


- **Toujours la hauteur de travail optimale** : adaptez facilement la table d'examen MultiPro® next à votre travail et ménagez votre dos.
- **Réglage intuitif de la hauteur** : depuis n'importe quelle position autour du lit MultiPro®, vous pouvez modifier la hauteur de travail de manière intuitive grâce au système de réglage intelligent. Un arceau de pied moulé sur tout le pourtour.
- **Système de freinage Push-to-Stop** : une simple pression du pied suffit pour mettre toute la table sur les roulettes et la remettre sur ses pieds. Votre table est toujours stable pour votre sécurité et celle de vos patients.
- **Commande du réglage des coussins** : les leviers de déclenchement pour le réglage des coussins se trouvent aux endroits habituels, ce qui permet un réglage simple et rapide. Une utilisation rapide est assurée. L'utilisation est toujours garantie des deux côtés.
- **Ressorts à gaz de qualité** : Les vérins à gaz participent activement au réglage du dossier, ce qui réduit l'effort et facilite le travail. De plus, vous positionnez et placez ainsi vos patients de manière optimale et fiable pour les différents traitements.
- **Liberté de mouvement** : grâce à la conception élancée du piètement vous avez un bon accès au patient. Même avec un tabouret, vous êtes toujours dans la position optimale pour le traitement.
- **Une stabilité optimale** : grâce à des pieds stables spécialement conçus, la surface d'appui de la table est doublée. Les grandes surfaces d'appui empêchent la table de glisser pendant le traitement. De plus, le sol est préservé et les empreintes sont minimisées.



hauteur de travail toujours optimale




réglage intuitif de la hauteur avec étrier de pied

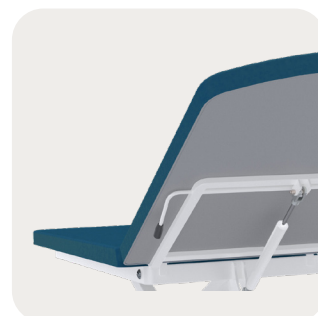

réglage instinctif des coussins



hauteur d'accès basse et confortable

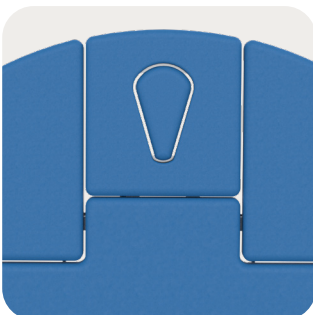

Ouverture faciale HESS en forme de goutte



rembourrage soudé

... et pour vos patients et patientes !

- **Grande plage de réglage de la hauteur** : hauteur d'accès extra basse pour que les personnes à mobilité réduite puissent monter et descendre confortablement à tout moment. Cela permet également de garantir un transfert sûr depuis le fauteuil roulant.
- **Ouverture faciale HESS** : le patient est allongé et détendu sur la table. L'ouverture faciale HESS en forme de goutte laisse les yeux et la bouche libres, ce qui permet au patient de vous parler pendant le traitement.
- **Coussins renforcés sur les bords** : vos patients ne sentent pas les points durs des bords lors de la montée ou de la descente. Les points de pression sont réduits. Le confort de vos patients augmente.
- **Coussins soudés de manière étanche** : aucun risque de blessure avec des housses de coussins soudées hermétiquement. Les liquides et les germes ne peuvent pas pénétrer dans le rembourrage. Hygiène et sécurité optimales pour vous et vos patients.
- **Répartition des surfaces de rembourrage** : Les coussins sont répartis de manière à ce que chaque patient soit positionné de manière optimale.
- **Grand confort de couchage** : le noyau de rembourrage en mousse de haute qualité garantit un grand confort de couchage. Grâce aux coussins emboutis, il n'y a pas de points de pression inconfortables aux passages des coussins.

Les arguments


Le système de rembourrage "MediPad" de HESS est parfaitement hygiénique



aucun risque de blessure et facile à nettoyer grâce aux coussins médicaux soudés de manière étanche



pas de pénétration de liquides dans le noyau du rembourrage, grâce à une finition sans couture

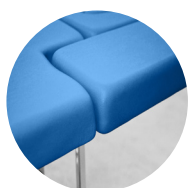

pas d'arêtes dures en s'asseyant grâce aux renforts des zones de bordure



produit suisse de haute qualité



"HESS plus"
3 ans de garantie



ergonomique



Service



Conforme à
la norme CE



Rembourrage étanche



Difficilement inflammable
selon la norme DIN
53438



Système de rembourrage HESS MediPad
rembourrage médical sans couture et ren-
forcement des angles et arêtes




hygiéniquement irréprochables :
parties rembourrées soudées sans
couture protection contre les bactéries

Système de freinage HESS "Push-to-Stop" : une légère pression du pied permet de bloquer la table en douceur et de la ménager.



grandes surfaces d'appui
qui protègent le sol

- réglage en continu de la hauteur sans aucun déport latéral - moins d'encombrement
- stabilité absolue dans toutes les positions
- entraînement rapide, puissant et silencieux (36 mm/ s)

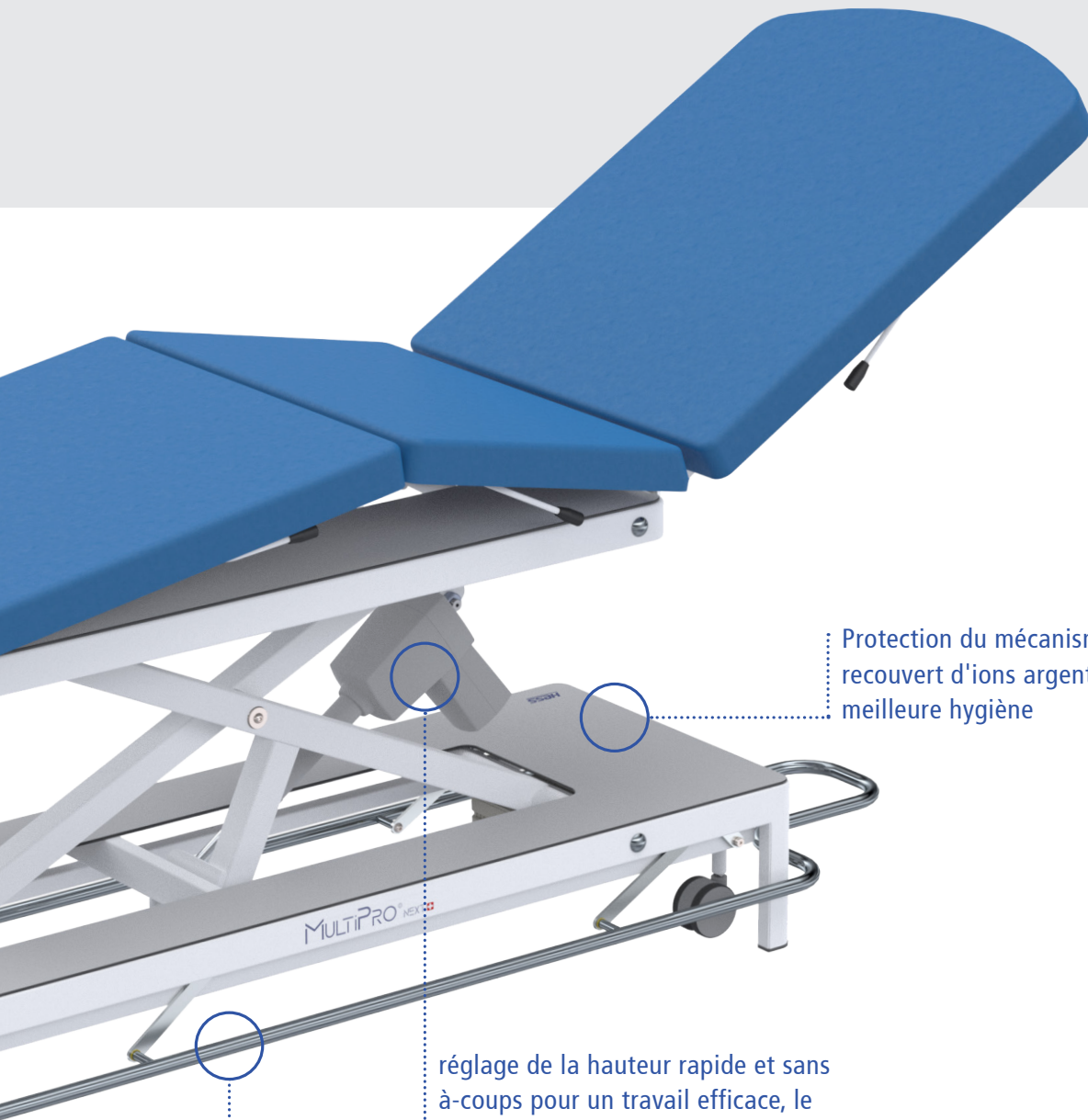

Protection du mécanisme avec HPL-Cover recouvert d'ions argent, antibactérien pour une meilleure hygiène

réglage de la hauteur rapide et sans à-coups pour un travail efficace, le moteur reste très silencieux

arceau de pied circulaire pour utilisation intuitive de tous les côtés

HESS MediPad

Le système de rembourrage suisse



L'hygiène est importante pour nous - pour vous aussi ?

HESS MediPad - Le système de rembourrage suisse spécialement développé pour l'utilisation dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. L'association intelligente de matériaux de qualité supérieure et d'une excellente finition permet d'obtenir des produits de haute qualité et des résultats incomparables.



La structure du coussin est composée de cinq éléments de haute qualité. La base est une plaque de support stable qui confère au coussin la stabilité et la sécurité nécessaires. Un noyau en mousse sans latex y est collé, ce qui permet au patient d'être confortablement installé pour ses soins. La plaque de support est bordée d'une bande antichoc. Ce renforcement des bords évite les arêtes ou les points de pression. Tout l'intérieur est ensuite recouvert de similicuir médical et soudé sur la face inférieure avec un film étanche. Le similicuir possède un traitement de surface antibactérien et antimoisissure (Sanitized) et est absolument étanche aux liquides. Ainsi, le sang, l'urine ou d'autres liquides ne peuvent pas pénétrer dans le noyau du rembourrage.



Pas de risque de blessure, car le rembourrage n'est pas agrafé, mais est soudé. Il n'y a donc pas de plis où la saleté et les microbes peuvent se déposer et s'accumuler. Il est donc facile et rapide à nettoyer.



La housse de rembourrage est enfilée sans couture sur le noyau. Cette finition empêche les liquides de pénétrer dans le noyau du rembourrage.



Les renforts des bords évitent les arêtes douloureuses lorsque l'on s'assied ou que l'on descend de la table d'examen MultiPro .®

Seul le système de rembourrage HESS MediPad vous offre ces avantages. Nous garantissons une fabrication de haute qualité suisse.

Le système de rembourrage HESS MediPad est parfaitement hygiénique !

Service HESS

T+ 41 55 619 20 87

Nous prenons très sérieusement en compte le mandat de prestations envers nos clients. C'est pourquoi le suivi des clients ne s'arrête pas à la vente et à la livraison d'un produit.



Notre promesse : Le département de service de HESS Medizintechnik AG est là pour vous ! En ligne, par téléphone ou en cabinet, à l'hôpital ou à domicile. Découvrez nos services : Par exemple, notre assistance technique sur votre site. Que pouvons-nous faire pour vous ?

Vous bénéficiez d'une assistance téléphonique d'urgence 24h/24. En cas de panne nous vous garantissons un service rapide, simple et personnalisé pour vos dispositifs médicaux grâce à nos techniciens de service formés. Pour réparations et révisions, nous sommes toujours au bon endroit, au moment convenu, avec les ressources nécessaires.

Nous offrons un service et une assistance complets tout au long du cycle de vie de vos produits. Nos services en ligne permettent de résoudre vous-même divers problèmes. Simple et rapide, vous trouverez ici par exemple des listes de pièces de rechange, des modes d'emploi et bien d'autres choses encore.

HESS Service - un partenaire solide sur lequel vous pouvez compter !



Assistance
téléphonique 24h/24



un service professionnel



Contrats de service



Mise à disposition et
mise en service



utilisation flexible



Fauteuil de soins MultiPro® next 1

Exemple d'application



Variantes

Type	standard	eco	pompe
MultiPro® next 1	H06-180	H06-181	H06-182
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- Charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 44 - 96 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage d'une seule pièce : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56 - 59



Pack de batteries en
option pour un travail
autonome Réf. : H06-548



Fauteuil de soins MultiPro® next 2

Exemples d'application



Variantes

Typ	standard	eco	pompe
MultiPro® next 2	H06-100	H06-101	H06-102
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 44 - 96 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en deux parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56 - 59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Table de soins MultiPro® next 2 stable

Exemples d'application



Variantes

Typ	standard	eco
MultiPro® next 2 stable	H06-105	H06-106
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- Revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- construction extra stable
- Plage de réglage de la hauteur : 44 - 96 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en deux parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté et en continu

Caractéristiques techniques pages 56 - 59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Fauteuil de soins MultiPro® next 3

Exemples d'application



Variantes

Typ	standard	eco	pompe
MultiPro® next 3	H06-110	H06-111	H06-112
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- Revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en trois parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté et en continu
- repose-jambes et repose-cuisses réglables en continu
- Position de Trendelenburg : jusqu'à -15° assisté par la force et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56 - 59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Table de thérapie MultiPro® next 4

Exemples d'application



Variantes



Type	standard	eco	pompe
MultiPro® next 3	H06-170	H06-171	H06-172
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- Revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en quatre parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Tête de lit sur toute la largeur avec découpe ergonomique du visage, y compris garniture de rembourrage
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté par la force et en continu
- Plage de réglage de la tête : +35°/- 25°, assisté par la force et en continu
- repose-jambes et repose-cuisses réglables en continu
- Position de Trendelenburg : jusqu'à -15° assisté par la force et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56 - 59



Pack de batteries en
option pour un travail
autonome Réf. : H06-548



Table de thérapie MultiPro® next 5

Exemples d'application



Variantes

Type	standard	eco	pompe
MultiPro® next 5	H06-120	H06-121	H06-122
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- Revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 44 - 96 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en cinq parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- partie dorsale avec découpe ergonomique du visage, y compris garniture rembourrée et accoudoirs réglables en continu
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté et en continu
- Plage de réglage de la pièce faciale : +35°/- 25°, assisté par la force et en continu
- pump : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- pump : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56 - 59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548

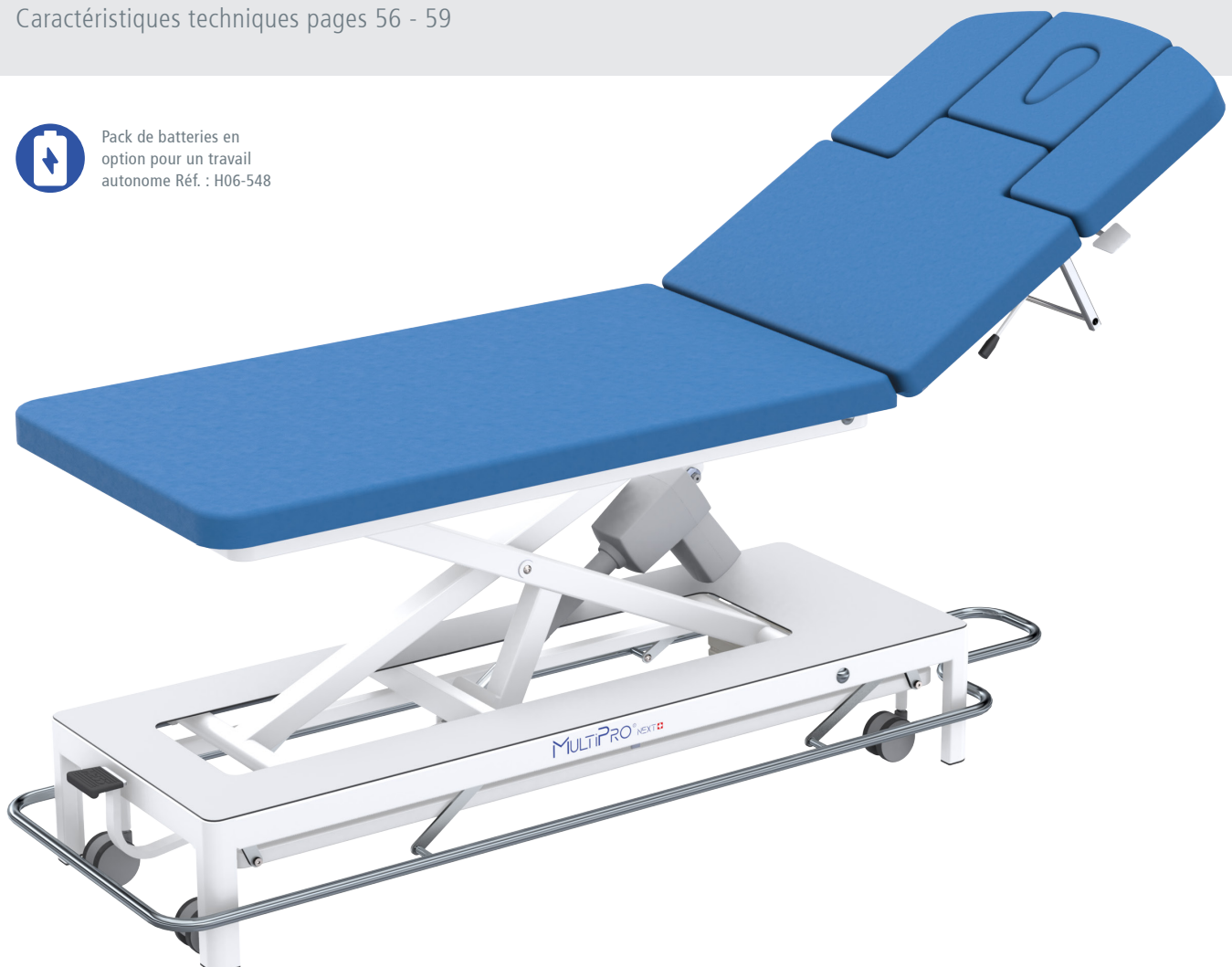


Table de thérapie MultiPro® next 5 stable

Exemples d'application



Variantes



Type	standard	eco
MultiPro® next 5 stable	H06-124	H06-125
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- construction extra stable
- Plage de réglage de la hauteur : 44 - 96 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en cinq parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Dossier avec découpe ergonomique du visage, y compris garniture rembourrée et accoudoirs réglables en continu
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté par la force et en continu
- Plage de réglage de la pièce faciale : +35°/- 25°, assisté par la force et en continu

Caractéristiques techniques pages 56 - 59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Table de thérapie MultiPro® next 6

Exemples d'application



Variantes

Type	standard	eco	pompe
MultiPro® next 6	H06-130	H06-131	H06-132
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- Revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- couchage en six parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- partie dorsale avec découpe ergonomique du visage, y compris garniture rembourrée et accoudoirs réglables en continu
- Plage de réglage de la partie dorsale : +75°/- 20°, assisté par la force et en continu
- Plage de réglage de la pièce faciale : +35°/- 25°, assisté par la force et en continu
- repose-jambes et repose-cuisses réglables en continu
- Position de Trendelenburg : jusqu'à -15° assisté par la force et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56 - 59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Table de thérapie MultiPro® next 6 Optimal

Exemples d'application



Variantes

Type	standard	eco	pompe
MultiPro® next 6 Optimal	H06-140	H06-141	H06-142
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- Revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- couchage en six parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Dossier avec découpe ergonomique du visage, y compris garniture rembourrée et accoudoirs réglables en continu
- Plage de réglage de la partie dorsale : +75°/- 20°, assisté par la force et en continu
- Plage de réglage de la pièce faciale : +35°/- 25°, assisté par la force et en continu
- repose-jambes et repose-cuisses réglables en continu
- Position de Trendelenburg : jusqu'à -15° assisté par la force et en continu
- 3 Points de fixation des rouleaux de fixation
- 1 rouleau de fixation
- 1 support de rouleau de fixation monté sur la table côté pied
- Rails latéraux pour systèmes de ceinture, revêtement par poudre (RAL 9016 blanc trafic), rond, Ø 20 mm
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56–59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Table de thérapie MultiPro® next Manu

Exemples d'application



Variantes

Type	standard	eco	pompe
MultiPro® next Manu	H06-160	H06-161	H06-162
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 5 cm (avec un noyau de mousse de 3 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- cyphose optimale grâce à une partie intermédiaire horizontale fixe
- surface de couchage en quatre parties : 192× 62 cm (longueur× largeur)
- pièce faciale avec fente faciale ergonomique, y compris garniture de rembourrage
- Plage de réglage du dossier : +55°/- 25°, assisté et en continu
- Plage de réglage du plastron : +30°/- 0°, assisté par la force et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56–59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Exemples d'application



Variantes et Accessoires

							
Type	standard	eco	pompe	Insertion de la partie pelvienne	réglage électrique de la partie du bassin	Supports de talon chromés	Genouillères
MultiPro® next Gyno	H06-150	H06-151	H06-152	H06-537	H06-519.002	H06-514	H06-516
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique				Plastique

Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Roulettes pivotantes doubles : Ø 75 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : système de freinage central HESS "Push-to-Stop", intuitif et facile d'utilisation
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en trois parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Plage de réglage de la tête : +75°/- 25°, assisté par la force et en continu
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 0°, assisté et en continu
- Plage de réglage de la partie bassin : au moyen d'un réglage par crans en trois positions, +15° max.
- Partie du bassin avec découpe
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56–59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Bild zeigt Zubehör

Tiroir	Support pour colposcope	Dmed® hx LED Examen lampe d'éclairage	Fixation des rails	Rail pour appareils
H06-515	H06-517	D15665000	H20-181	H06-506
en acier inoxydable	pour Olympus, Zeiss et Leisegang (sous réserve de rail de fixation présent)	blanc pur (RAL 9010) (sous réserve de rail de fixation présent)		25 × 10 mm


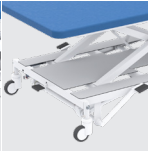


Table de thérapie MultiPro® next Bobath

Exemples d'application

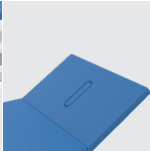

Variantes et Accessoires

						
Type	standard	eco	pompe	Découpe du visage	Surface de couchage 120 cm	Surface de couchage 140 cm
MultiPro® next Bobath une pièce	H06-300	H06-301	H06-302	—	H06-547.01	H06-547.02
MultiPro® next Bobath en deux parties	H06-400	H06-401	H06-402	H06-527	H06-547.01	H06-547.02
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pédale de commande	Pompe hydraulique			

Bobath 1



Bobath 2



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 5 cm (avec un noyau de mousse de 3 cm)
- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- charge maximale : 280 kg
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.


Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 39 - 93 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en une ou deux parties : 200× 100 cm (longueur× largeur)
- plan de couchage en deux parties : plage de réglage du relèvement-buste : +75°/- 20°, assisté et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg

Caractéristiques techniques pages 56–59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548

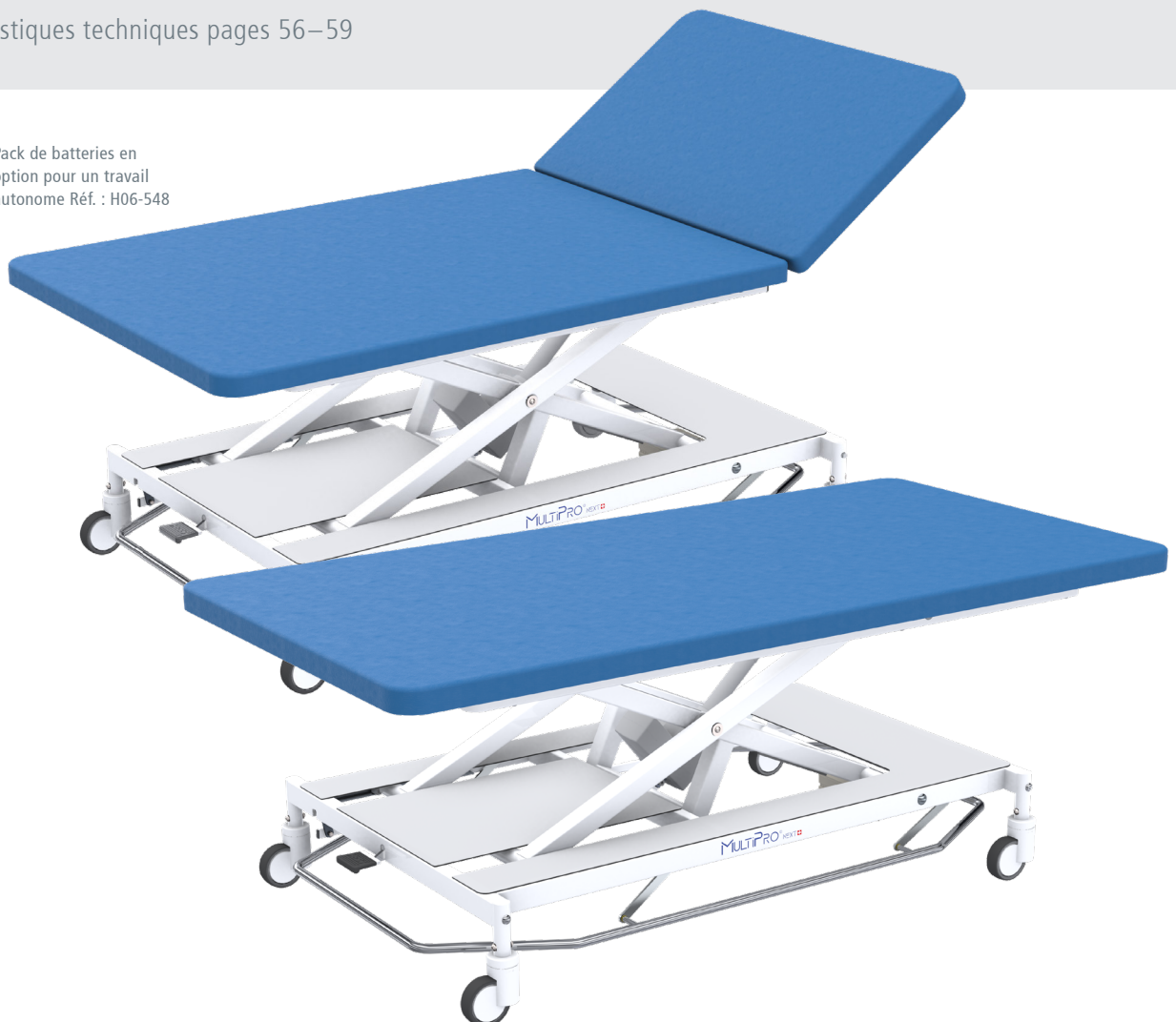

Exemple d'application



Variantes et Accessoires

					
Typ	standard	pompe	Rail pour appareils	Grille latérale HPL (paire)	Support pour rouleaux de papier
MultiPro® next Praktitrans 1	H06-740	H06-742	H06-506	H06-528	H06-501
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pompe hydraulique	25 × 10 mm	peut être bloqué dans trois positions (sous réserve de rail de fixation présent)	côté tête



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- Épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 44 - 96 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage d'une seule pièce : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg



Caractéristiques techniques pages 56–59




Pack de batteries en
option pour un travail
autonome Réf. : H06-548



Exemples d'application



Variantes et Accessoires

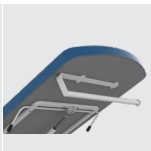					
Type	standard	pompe	Rail pour appareils	Grille latérale HPL (paire)	Support pour rouleaux de papier
MultiPro® next Praktitrans 2	H06-700	H06-701	H06-506	H06-528	H06-501
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pompe hydraulique	25 × 10 mm	peut être bloqué dans trois positions (sous réserve de rail de fixation présent)	côté tête



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- Épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 44 - 96 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en deux parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg



Caractéristiques techniques pages 56–59



Pack de batteries en
option pour un travail
autonome Réf. : H06-548



Exemples d'application



Variantes et Accessoires

					
Type	standard	pompe	Rail pour appareils	Grille latérale HPL (paire)	Support pour rouleaux de papier
MultiPro® next Praktitrans 3	H06-710	H06-711	H06-506	H06-528	H06-501
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pompe hydraulique	25 × 10 mm	peut être bloqué dans trois positions (sous réserve de rail de fixation présent)	côté tête



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture-empêchant toute infiltration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en trois parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté et en continu
- repose-jambes et repose-cuisses réglables en continu
- Position de Trendelenburg : jusqu'à -15° assisté par la force et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg



Caractéristiques techniques pages 56–59



Pack de batteries en
option pour un travail
autonome Réf. : H06-548



Exemples d'application



Variantes et Accessoires

					
Type	standard	pompe	Rail pour appareils	Grille latérale HPL (paire)	Support pour rouleaux de papier
MultiPro® next Praktitrans 4	H06-750	H06-751	H06-506	H06-528	H06-501
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pompe hydraulique	25 × 10 mm	peut être bloqué dans trois positions (sous réserve de rail de fixation présent)	côté tête



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en quatre parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Tête de lit sur toute la largeur avec découpe ergonomique du visage, y compris garniture de rembourrage
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté et en continu
- Plage de réglage de la tête : +35°/- 25°, assisté par la force et en continu
- repose-jambes et repose-cuisses réglables en continu
- Position de Trendelenburg : jusqu'à -15° assisté par la force et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg



Caractéristiques techniques pages 56–59




Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Exemples d'application



Variantes et Accessoires

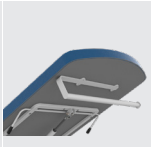					
Type	standard	pompe	Rail pour appareils	Grille latérale HPL (paire)	Support pour rouleaux de papier
MultiPro® next Praktitrans 5	H06-720	H06-721	H06-506	H06-528	H06-501
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pompe hydraulique	25 × 10 mm	peut être bloqué dans trois positions (sous réserve de rail de fixation présent)	côté tête



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- Épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute infiltration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 44 - 96 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- surface de couchage en cinq parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- partie dorsale avec découpe ergonomique du visage, y compris garniture rembourrée et accoudoirs réglables en continu
- Plage de réglage de la partie dorsale : +75°/- 20°, assisté par la force et en continu
- Plage de réglage de la pièce faciale : +35°/- 25°, assisté par la force et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg



Caractéristiques techniques pages 56–59




Pack de batteries en
option pour un travail
autonome Réf. : H06-548



Exemples d'application



Variantes et Accessoires

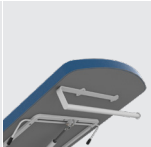					
Type	standard	pompe	Rail pour appareils	Grille latérale HPL (paire)	Support pour rouleaux de papier
MultiPro® next Praktitrans 6	H06-730	H06-731	H06-506	H06-528	H06-501
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pompe hydraulique	25 × 10 mm	peut être bloqué dans trois positions (sous réserve de rail de fixation présent)	côté tête



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- couchage en six parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- partie dorsale avec découpe ergonomique du visage, y compris garniture rembourrée et accoudoirs réglables en continu
- Plage de réglage de la partie dorsale : +75°/- 20°, assisté par la force et en continu
- Plage de réglage de la pièce faciale : +35°/- 25°, assisté par la force et en continu
- repose-jambes et repose-cuisses réglables en continu
- Position de Trendelenburg : jusqu'à -15° assistée par la force et en continu
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg



Caractéristiques techniques pages 56–59



Pack de batteries en
option pour un travail
autonome Réf. : H06-548



MultiPro® next Praktitrans 6 Optimal

Exemples d'application



Variantes et Accessoires ana- logues à d'autres modèles

Typ	standard	pompe	Geräte- schiene	HPL-Seiten- gitter (Paar)	Papierrollen- halter
MultiPro® next Praktitrans 6 Optimal	H06-760	H06-761	H06-506	H06-528	H06-502
	arceau de pied sur tout le pourtour	Pompe hydraulique	25 × 10 mm	peut être bloqué dans trois posi- tions (sous ré- serve de rail de fixation présent)	côté pied



Équipement de base

- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- charge maximale : 200 kg (250 kg en option)
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle

- Plage de réglage de la hauteur : 46 - 98 cm, avec démarrage en douceur pour un réglage sans à-coups
- couchage en six parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- partie dorsale avec découpe ergonomique du visage, y compris garniture rembourrée et accoudoirs réglables en continu
- Plage de réglage de la partie dorsale : +75°/- 20°, assisté par la force et en continu
- Plage de réglage de la pièce faciale : +35°/- 25°, assisté par la force et en continu
- repose-jambes et repose-cuisses réglables en continu
- Position de Trendelenburg : jusqu'à -15° assisté par la force et en continu
- 3 Points de fixation des rouleaux de fixation
- 1 rouleau de fixation
- 1 support de rouleau de fixation monté sur la table côté pied
- Rails latéraux pour systèmes de ceinture, revêtement par poudre (RAL 9016 blanc trafic), rond, Ø 20 mm
- **pump** : réglage hydraulique de la hauteur au moyen d'une pédale facile à utiliser
- **pump** : charge maximale : 200 kg



Caractéristiques techniques pages 56–59



Pack de batteries en option pour un travail autonome Réf. : H06-548



Exemples d'application



Variantes et Options

Type	EasyLine FIX	EasyLine ZTB	Supplément hauteur 65/75 cm	Supplément châssis chromé	Structure en RAL Couleur au choix	partie couchage réglable en hauteur en continu
Höhe 70 cm	H04-120.070	H04-121.070	H04-HÖHE	H04-CHROM	H04-FARBE	H04-415

EasyLine FIX



EasyLine ZTB



Équipement de base

- surface de couchage en deux parties : 205× 65 cm (longueur× largeur)
- Plage de réglage du dossier : +75°/- 20°, assisté et en continu
- Couleur du cadre : RAL 9016 blanc trafic
- épaisseur du rembourrage : 6 cm (avec un noyau de mousse de 4 cm)
- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- charge maximale : 250 kg
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Rembourrage : HESS "MediPad" rembourrage médical revêtu d'une protection et soudé sans couture empêchant toute pénétration de liquide.

Caractéristiques spécifiques au modèle ZTB

- Rouleaux à une seule cellule : Ø 100 mm avec pare-fils
- Système de freinage : blocage total centralisé au moyen d'une pédale facile à utiliser



Table mobile de traitement et de thérapie EasyStore

Exemples d'application



Accessoires



Typ		Chaise de thérapeute Base-Line
EasyStore	H04-130	H01-300.300



Le HESS EasyStore a été développé en étroite collaboration avec le SICO (Swiss International College of Osteopathy). Une solution sur mesure pour la pratique comme pour la théorie.




Équipement de base


- surface de couchage en deux parties : 190× 65 cm (longueur× largeur)
- Tête de lit : 15 cm, 18 cm extensible
- Couleur du cadre : anodisé incolore
- épaisseur du rembourrage : 3 cm, tapis d'appui amovible
- charge maximale : 150 kg
- revêtement des coussins : similicuir résistant avec revêtement de protection
- Poids total : env. 23 kg, tapis d'appui inclus










Caractéristiques spécifiques au modèle

- Réglage en hauteur : pieds télescopiques avec positions d'arrêt - 54, 60, 66, 72 cm
- construction en aluminium extra légère mais robuste
- pieds rabattables pour un stockage peu encombrant
- sans tapis d'appui, idéal comme bureau pour les formations


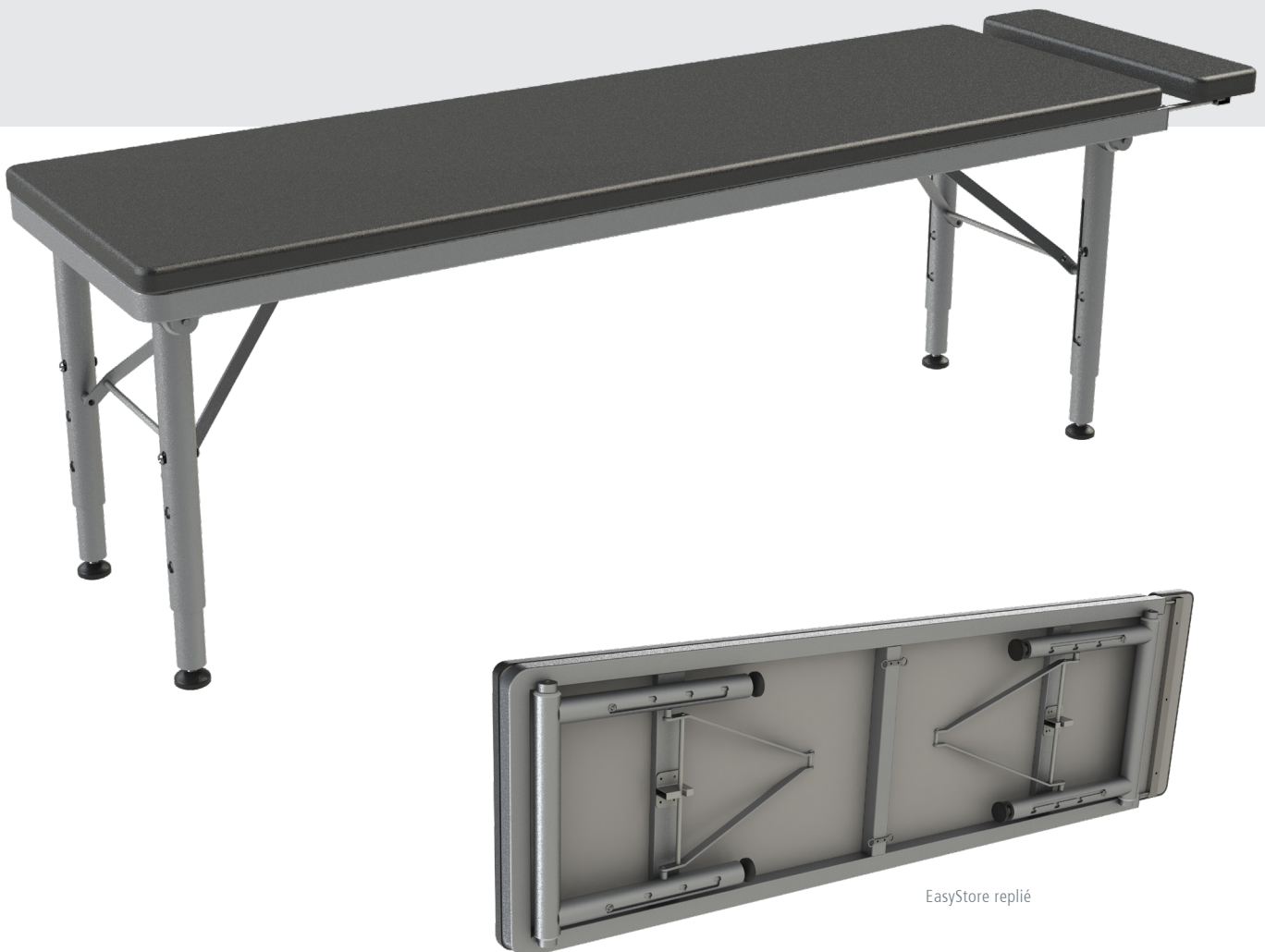


EasyStore replié


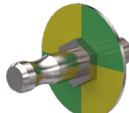
							
H06-521 Largeur du plan de couchage 70 cm	H06-522 Largeur du plan de couchage 75 cm	H06-526 Largeur du plan de couchage 80 cm	H06-523 Épaisseur du rembourrage 5 oder 7 cm	H06-523.01 Épaisseur du rembourrage 8 oder 9 cm	H06-548 Pack de batteries pour Multi-Pro® next	H06-546 supplément HPL couleur de couverture au choix	H06-524 Supplément pour couleur de revêtement autre que le standard HESS
							
H06-524.01 Supplément pour couleur de sellerie conductrice électrique noire	H06-525 Structure en couleur RAL au choix	H06-535 Rembourrage extra doux de 6 cm (mousse à mémoire de forme)	H06-500 découpe ergonomique du visage	H06-536 Supplément pour moteur pour charges lourdes jusqu'à 250 kg de capacité de charge	H06-518 Boîte de blocage	H06-533 Sécurité enfants H06-534 Sécurité enfants pour MultiPro® pump	H06-519 partie dorsale réglable en continu par moteur
							
H06-511 Découpe du visage côté pied	H06-531 Rembourrage de la pièce faciale sur toute la largeur	H06-508 Découpe cardio	H06-509 Semelle intérieure cardio	H06-552 Câble pour appareils hospitaliers avec connexion ZPA intégrée	H06-552.01 compensation de potentiel supplémentaire avec bolon de raccordement 	H06-503 Élément de couchage relevable	H06-530 Situation Trendelenburg/ Antitrendelenburg 
					H06-548.001 Abnehmbares Netzkabel		H06-559 Poignée de poussée pour MultiPro next

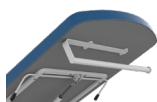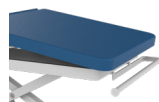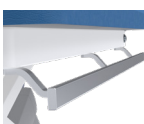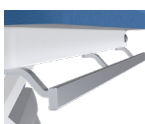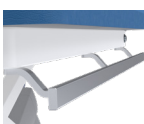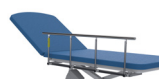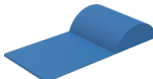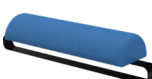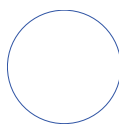							
H06-501 Support de rouleau de papier côté tête	H06-502 Support de rouleau de papier côté pied	H06-532 Rouleaux de papier Carton à 9 rouleaux	H06-506 Rail pour appareils 25× 10 mm, pour une largeur de coussin de 65 cm	H06-506.001 Rail pour appareils 25× 10 mm, pour une largeur de coussin de 70 cm	H06-506.002 Rail pour appareils 25× 10 mm, pour une largeur de coussin de 75/80 cm	H06-507 Rail latéral pour systèmes de ceinture, rond Ø 20 mm	H06-555 Protection d'angle pour MultiPro® Coussin
							
H06-528 Grille latérale HPL (paire) pouvant être bloquée dans trois positions (sous réserve de rail de fixation présent)	H06-544 Barrières latérales abaissables (paire) pour largeur de table 65 cm H06-544.01 pour largeur de table 70–80 cm	H06-510 Appui-bras rembourré (sous réserve de rail de fixation présent) H06-510.001 Table d'accoudoir rembourrée hauteur fixe	H06-529 Tapis de protection 81 × 45 cm H06-529.0X Tapis de protection monté de manière fixe	H09-109 Oreiller avec support velcro réglable en hauteur H09-109.01 Oreiller avec contrepoids	H06-551.01 Demi-rouleau avec bande de fixation avec fermeture velcro Ø 18 cm, 50 cm de long	H06-553.01 Demirouleau sans bande de fixation Ø 18 cm, 50 cm de long	H06-550.01 Rouleau pour les genoux Ø 18 cm, 50 cm de long
							
H06-561.001 Feuille d'anesthésie	H06-550.02 Relax-coussin 30 x 30 cm avec support velcro réglable en hauteur H06-550.03 Relax-coussin 50 x 30 cm avec support velcro réglable en hauteur	MX9-19-1.01 coussinet facial en forme de fer à cheval 	H06-991 Produit de nettoyage HESS MultiClean® 300 ml 	H06-990 Produit de nettoyage Ferrari-Clean 500 ml 	H06-9020 Prolongation de la garantie d'un an	H06-540.01 Drap-housse pour Multi-Pro® blanc 	H06-540.02 Drap-housse pour Multi-Pro® ivoire 
		H06-532.01 Foulard à fente nasale	H06-991.01 HESS MultiClean® 5 l	H06-992 Désinfectant de surface mi-krozyd® 500 ml		H06-540.03 Drap-housse pour Multi-Pro® menthe	H06-540.04 Drap-housse pour Multi-Pro® bleu acier

MultiPro® next 1 MultiPro® next Praktitrans 1

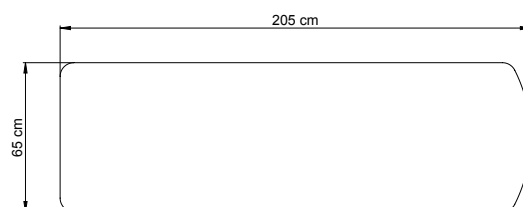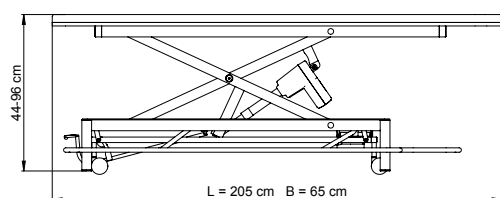



MultiPro® next 2 MultiPro® next 2 stabile MultiPro® next Praktitrans 2

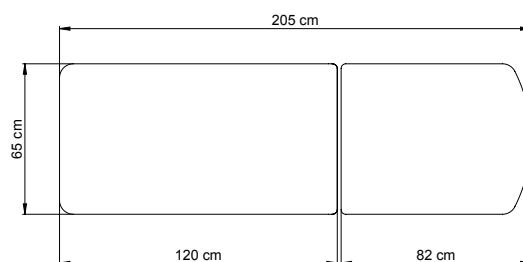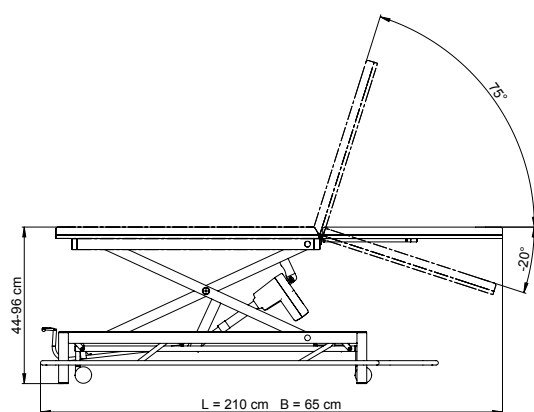

- Raccordement au réseau : 230VAC / 50 Hz / 1,5 A
- Boîtier de contrôle : classe de protection II, protection contre les projections d'eau IP 54, appareils de type B, testés selon EN 60335-1
- Entraînement standard : pression 7000 N, 24 V DC / 8 A
- Entraînement pour charges lourdes : pression 10 000 N, 24 V DC / 8 A
- Vitesse sans charge 36 mm/ s (réglage de la hauteur)
- Entraînements protégés contre les projections d'eau IP 54, testés selon EN 60601-1 et UL 2601-1
- Fonctionnement de courte durée (KB) : durée maximale de fonctionnement 2 minutes, durée minimale de repos 18 minutes



MultiPro® next 3

MultiPro® next Praktitrans 3

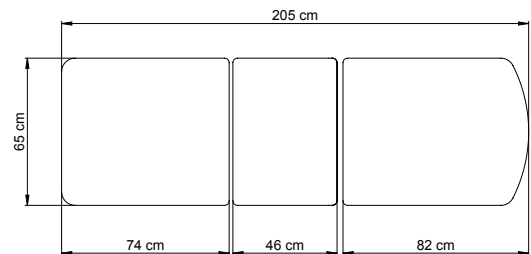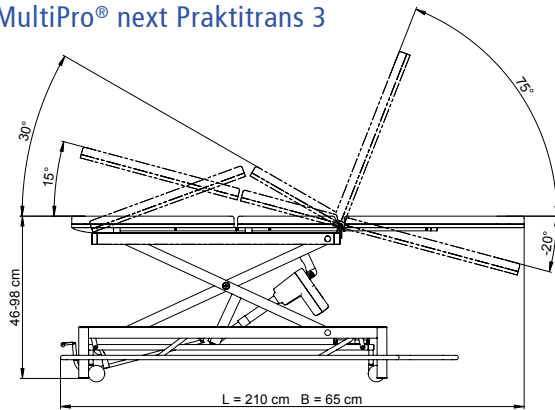

MultiPro® next 4



MultiPro® next Praktitrans 4

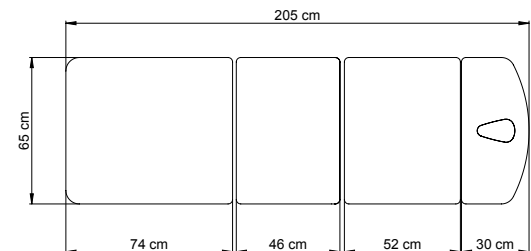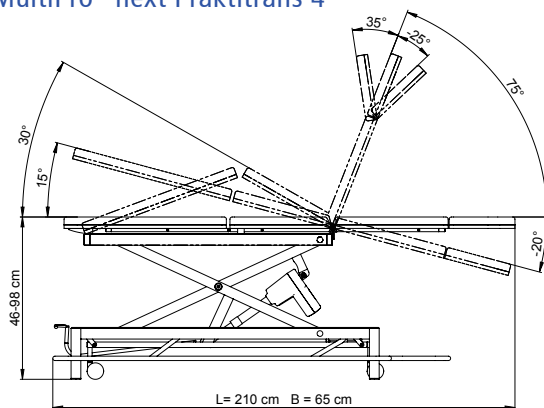



MultiPro® next 5

MultiPro® next 5 stabile



MultiPro® next Praktitrans 5

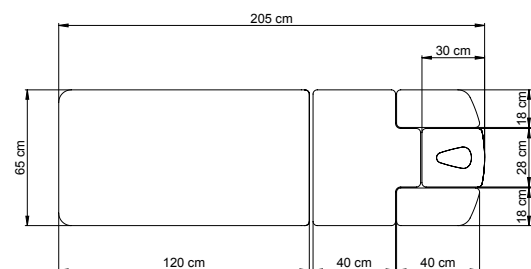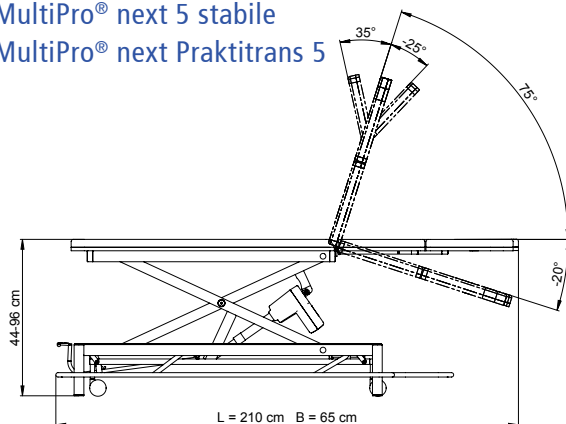

MultiPro® next 6
 MultiPro® next 6 Optimal
 MultiPro® next Praktitrans 6
 MultiPro® next Praktitrans 6 Optimal

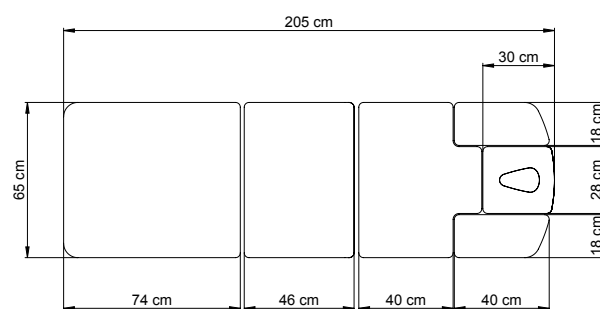
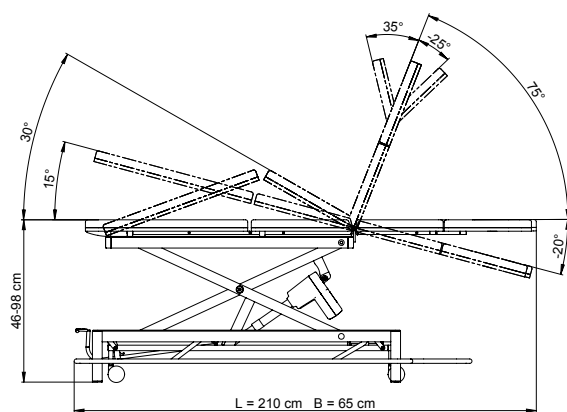


MultiPro® next Gyno

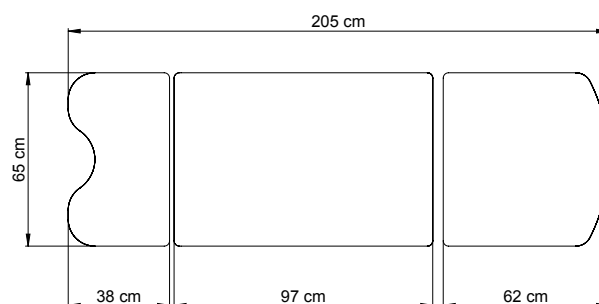
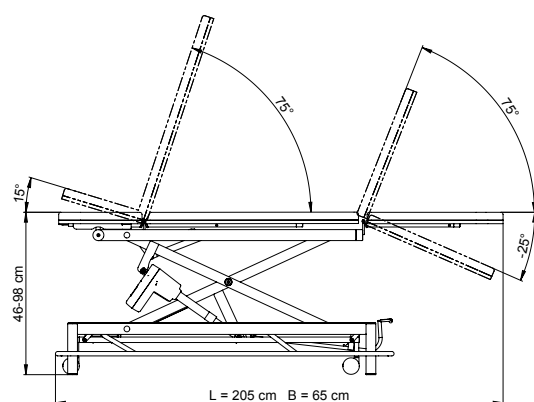


- Raccordement au réseau : 230VAC / 50 Hz / 1,5 A
- Boîtier de contrôle : classe de protection II, protection contre les projections d'eau IP 54, appareils de type B, testés selon EN 60335-1
- Entraînement standard : pression 7000 N, 24 V DC / 8 A
- Entraînement pour charges lourdes : pression 10 000 N, 24 V DC / 8 A
- Vitesse sans charge 36 mm/ s (réglage de la hauteur)
- Entraînements protégés contre les projections d'eau IP 54, testés selon EN 60601-1 et UL 2601-1
- Fonctionnement de courte durée (KB) : durée maximale de fonctionnement 2 minutes, durée minimale de repos 18 minutes



MultiPro® next Manu

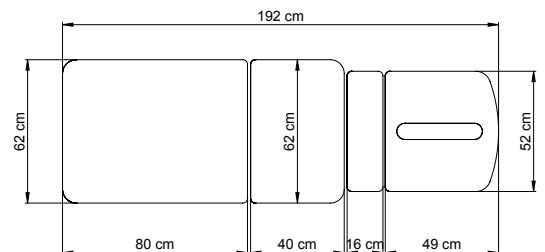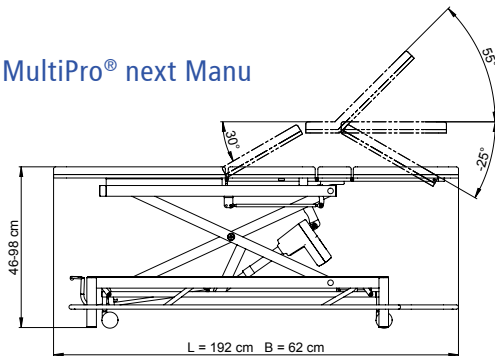

MultiPro® next Bobath 1

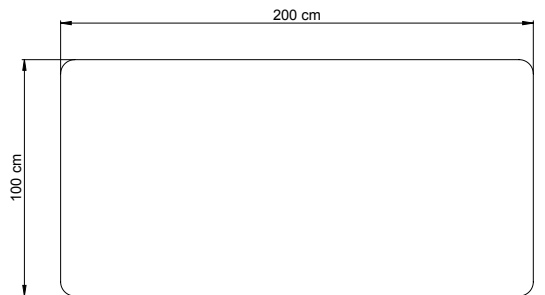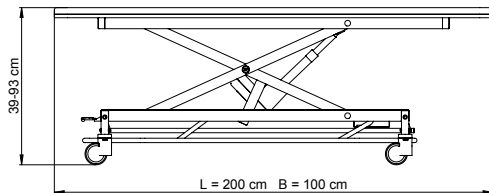

MultiPro® next Bobath 2

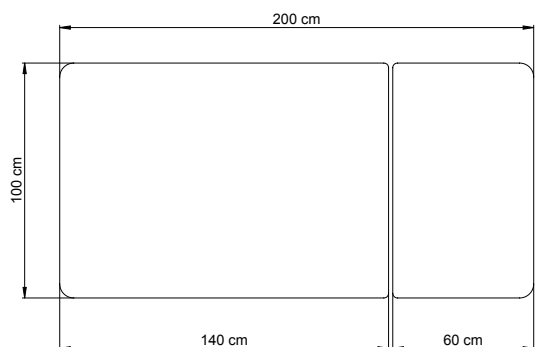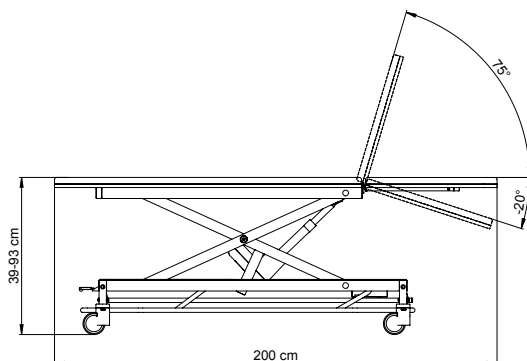



Art.-Nr. **H01-300.300**

Chaise de thérapeute Base-Line réglable en hauteur de env. 46 à 61 cm, assise rembourrée env. Ø 36 cm, revêtement du rembourrage en similicuir, piétement Ø 53 cm en aluminium anodisé brillant, 5 roulettes doubles de sécurité, freinées en fonction de la charge



Art.-Nr. **08069**

Variocar 60 Chariot de base

1 tiroir	
Largeur	60 cm
Hauteur	73 cm
Profondeur	45 cm



Art.-Nr. **05622**

Variocar 60 Chariot à étagères

3 plateaux de rangement	
Largeur	60 cm
Hauteur	83 cm
Profondeur	45 cm



Original HESS Boy

disponible en diverses dimensions, disponible avec un noyau plein Kellko ou des tablettes en aluminium



Art.-Nr. **H02-126.331**

HESS Boy

avec trois tablettes en aluminium, châssis : tube rond Ø 25 mm, chromé brillant. Roues pivotantes Ø 80 mm, noires. position des tablettes : 35 / 70 / 105 cm, charge max. par tablette 50 kg



Art.-Nr. **H03-100.101**

Porte-canne

pour 2 cannes en acier, revêtement par poudre



Art.-Nr. **H02-300.02**

Collecteur de déchets double pour 2 sacs de 100 à 110 l

Largeur	79 cm
Hauteur	102 cm
Profondeur	42,5 cm
(également disponible en version simple)	




Art.-Nr.	543 624
Chariot fonctionnel (sans accessoires)	
2 tiroirs	7,5 cm
2 tiroirs	15 cm
1 tiroirs	30 cm
Largeur	45 cm
Profondeur	53 cm
Hauteur de travail	83 cm
Hauteur du caisson	60 cm



Art.-Nr.	543 284
Chariot de traitement et de matériel	
5 tiroirs	15 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	58 cm
Hauteur de travail	98 cm
Hauteur du caisson	75 cm



Art.-Nr.	543 312
Chariot modulaire ISO (sans accessoires)	
2 portes battantes	
Largeur	90 cm
Profondeur	68 cm
Hauteur de travail	83 cm
Hauteur du caisson	60 cm

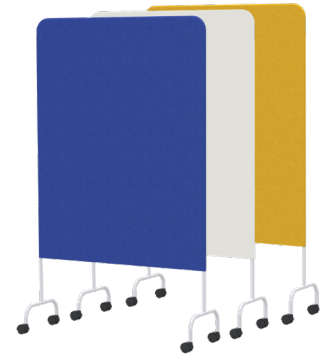

Art.-Nr.	H03-117.009
Paravent sur pied avec roulettes	
Revêtement	
bleu	H03-118.005
jaune	H03-118.003
blanc	H03-118.001



Systèmes d'armoires fonctionnelles

Pour obtenir des informations précises, veuillez nous contacter.

En tôle d'acier revêtue par poudre, alternativement en acier inoxydable, à combiner individuellement selon les besoins, résistant aux chocs et aux éraflures, hygiénique et facile à entretenir, résistant aux désinfectants, isolation phonique et joint périphérique.

Modifications techniques sous réserve de modifications. Les illustrations peuvent différer de l'original.

Autres accessoires dans le catalogue général HESS.

La table d'examen MultiPro® en action

Des utilisateurs satisfaits



«Lorsque j'achète des tables de soins, je fais surtout attention à la qualité, à la durée de vie et au design de la table. Le service offert et l'hygiène sont également très importants. Recevoir un produit HESS Medizintechnik AG remplit toutes ces conditions à 100%. Je ne peux que recommander votre table de traitement.»

Vicente Tristante
Aesthetik Berne



«Mon divan d'examen MultiPro® Stable facilite grandement mon travail. La fonctionnalité bien pensée, simple et intuitive m'aide à gagner du temps, que je peux utiliser pour le traitement de mes patients. Par exemple, la grande plage de réglage de la hauteur permet à mes patients de monter facilement et cela favorise de toujours travailler de manière ergonomique.»

Dr. med. Pietro L'Abate
Spécialiste FMH en médecine générale



«Le concept de HESS MultiPro fonctionnel® d'examen est convaincant. Grâce à diverses options et accessoires, les divans pour patients sont parfaitement adaptés aux besoins des patients et adaptables aux différentes exigences. Cette flexibilité, avec les multiples combinaisons et le grand choix de couleurs, nous a convaincus. Pour un conseil détaillé, j'ai visité avec toute l'équipe le showroom de HESS à Bilten. J'ai été surpris de voir combien tous ont pris le temps de répondre à nos questions. Les conseils étaient au top ! Un autre point positif est que les patients ont un véritable produit suisse.»

Dr. med. Durisch Ragetti Cabinet
médical Stenna, Flims



«Il y a une semaine, j'ai pu m'entraîner sur les tables HESS et j'ai constaté que la table HESS MultiPro® Manu correspondait exactement à mes attentes en matière de thérapie manuelle".»

Dr. med. Sabine Bichsel
Spécialiste FMH en médecine interne

Couleurs standard des coussins

Toutes les tables et tabourets pour patients de HESS Medizintechnik AG sont disponibles dans les couleurs de rembourrage standard suivantes :



KL005 Enzianblau



KL006 Kobaltblau



KL004 Tintenblau




KL003 Aquamarin




KL009 Wiesengrün




KL010 Limettengrün

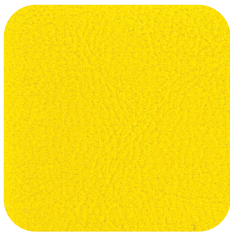

KL011 Zitronengelb

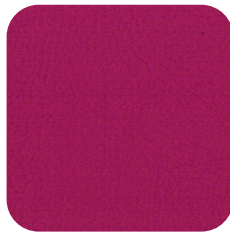


KL012 Pfingstrose

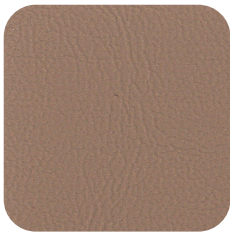

KL002 Cappuccino



KL008 Tiefschwarz

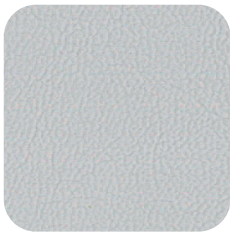

KL007 Steingrau



KL001 Schneeweiss


Autres couleurs de rembourrage (avec supplément de prix)



KL015 Smoke




KL022 Steinkohle

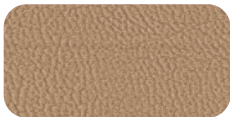


KL016 Macchiato




KL017 Sisal

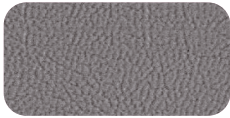

KL021 Mausgrau

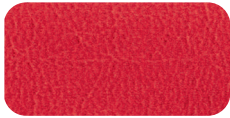

KL032 Mohnrot

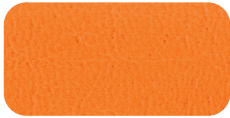

KL031 Kürbis



KL030 Goldgelb



KL026 Jeansblau



KL025 Kornblume



KL029 Pflaume



KL014 Cioccolato




KL023 Waldgrün



KL027 Admiralblau



KL028 Rotlila

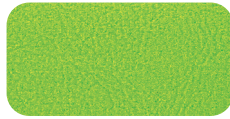

KL024 Lime




KL018 Tabacco



KL019 Elfenbein



KL020 Baumwolle

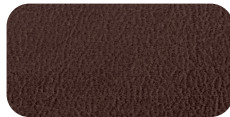

KL013 Espresso

Différences de couleurs possibles.



Lorsqu'il s'agit d'aménager et d'équiper des hôpitaux, des cabinets médicaux et des maisons de soins, nous sommes votre partenaire compétent. De la solution standard à la solution sur mesure, vous obtenez tout d'une seule source.

Conseil / Développement / Vente / Service



HESS Medizintechnik AG

Grabenstrasse 14
CH-8865 Bilten
T +41 55 619 20 80
F +41 55 619 20 81
info@hess-med.ch
hess-med.ch

