



HESS Medizintechnik AG

Ihr Kompetenzzentrum und Ansprechpartner
für Beschaffung, Planung, Finanzierung, Ausbildung
und Service in der Medizintechnik




KUNSTLEDER-FARBKARTE

CARTE DE COULEUR EN SIMILICUIR
SCHEMA COLORI SIMILPELLE



HESS DELUXE

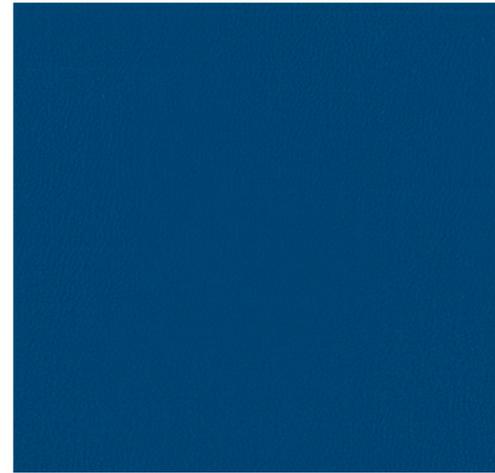

KL008 Tiefschwarz



KL007 Steingrau



KL001 Schneeweiss



KL002 Cappuccino




KL004 Tintenblau



KL006 Kobaltblau



KL005 Enzianblau

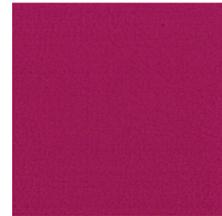

KL012 Pfingstrose



KL003 Aquamarin



KL009 Wiesengrün



KL010 Limettengrün



KL011 Zitronengelb



Passend dazu:

H06-991

Reinigungsmittel HESS MultiClean® 300 ml

Reinigungsmittel speziell für alle sensiblen und stark beanspruchten Oberflächen wie Kunstleder, Kunststoffe und Lackoberflächen. Reinigt schnell und gründlich, beseitigt Fett, Staub und andere Ablagerungen. Frischt Farben auf, pflegt dauerhaft. Hält speziell das Polster ihrer Therapieliege langfristig weich und geschmeidig. Biologisch leicht abbaubar.

HESS DELUXE+ mit Aufpreis / avec supplément / con suplemento



KL015 Smoke




KL022 Steinkohle



KL016 Macchiato



KL017 Sisal

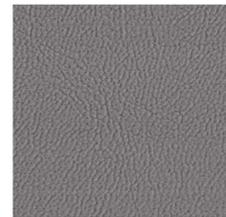


KL021 Mausgrau



KL032 Mohnrot



KL031 Kürbis

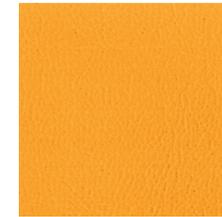

KL030 Goldgelb



KL026 Jeansblau



KL025 Kornblume



KL029 Pflaume



KL014 Cioccolato



KL023 Waldgrün




KL027 Admiralblau



KL028 Rotlila



KL024 Lime

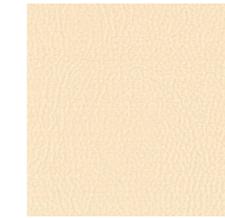

KL018 Tabacco



KL019 Elfenbein



KL020 Baumwolle



KL013 Espresso

HESS MediPad Das Schweizer Polstersystem

Hygiene ist uns wichtig – Ihnen auch?

HESS MediPad – Das Schweizer Polstersystem speziell entwickelt für den Einsatz in Spitälern und in Praxen. Das intelligente Zusammenspiel von qualitativ hochwertigen Materialien und einer hervorragenden Verarbeitung ergeben Eigenschaften die ihresgleichen suchen.

Der Aufbau des Polsters besteht aus fünf hochwertigen Komponenten. Basis bildet eine stabile Trägerplatte, die dem Polster die nötige Stabilität und Sicherheit verleiht. Darauf wird ein latexfreier Schaumstoffkern verklebt, der dem Patienten den nötigen Komfort gibt. Die Trägerplatte wird mit einem stossabfangenden Band umrandet. Diese Randzonenverstärkung verhindert Kanten oder Druckstellen. Das ganze Innenleben wird nun mit dem medizinischen Kunstleder überzogen und auf der Unterseite mit einer dichten Folie verschweisst. Das Kunstleder besitzt eine bakterien- und schimmelpilzabweisende Oberflächenbehandlung (Sanitized) und ist absolut Dicht gegen Flüssigkeiten. So können kein Blut, Urin oder sonstige Flüssigkeiten in den Polsterkern eindringen.



Keine Verletzungsgefahr, da das Polster nicht getackert wird, sondern verschweisst. So entstehen keine Falten, wo sich Schmutz und Mikroben absetzen und sammeln können. Dadurch ist es einfach und schnell zu reinigen.

Der Polsterüberzug wird nahtlos über den Kern gezogen. Diese nahtlose Verarbeitung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Polsterkern.

Randzonenverstärkungen verhindern schmerzhafte Kanten beim Aufsitzen oder Absteigen von der Patientenliege MultiPro®.

Diese Vorteile bietet Ihnen nur das HESS MediPad Polstersystem. Hochwertige Verarbeitung nach schweizer Qualität ist bei uns garantiert.

HESS MediPad Polstersystem ist hygienisch einwandfrei!



KUNSTLEDER-FARBKARTE

CARTE DE COULEUR EN SIMILICUIR

SCHEMA COLORI SIMILPELLE

Technische Daten

- ✓ DIN EN ISO 10993-10, Epikutantest, Hautirritation, allergische Kontaktreaktion
- ✓ DIN EN ISO 10993-5, Zytotoxizität
- ✓ DIN EN ISO 10993-1, Biologische Unbedenklichkeit
- ✓ DIN EN ISO 12 947-2, Martindale, ≥ 400.000 Scheuertouren
- ✓ COLD CRACK bei -29°C , 4.05J, FLTM BN 128-01, keine sichtbaren Risse
- ✓ DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente, Abgabe von Schwermetallen unterhalb der Nachweisgrenze
- ✓ urinbeständig, blutbeständig, schweissexakt

Données techniques

- ✓ DIN EN ISO 10993-10, test épicutané, irritation de la peau, réaction allergique de contact
- ✓ DIN EN ISO 10993-5, cytotoxicité
- ✓ DIN EN ISO 10993-1, sécurité biologique
- ✓ DIN EN ISO 12 947-2, Martindale, $\geq 400\ 000$ tournées de nettoyage
- ✓ CRACK FROID à -29°C , 4.05J, FLTM BN 128 -01, pas de fissures visibles
- ✓ DIN EN 71-3, sécurité des jouets, migration de certains éléments, libération de métaux lourds en dessous du seuil de détection
- ✓ résistant à l'urine, au sang, à la transpiration

Dati tecnici

- ✓ DIN EN ISO 10993-10, prova epicutanea, irritazione cutanea, reazione allergica da contatto
- ✓ DIN EN ISO 10993-5, citotossicità
- ✓ DIN EN ISO 10993-1, sicurezza biologica
- ✓ DIN EN ISO 12 947-2, Martindale, ≥ 400.000 giri di pulizia
- ✓ COLD CRACK a -29°C , 4.05J, FLTM BN 128 -01, nessuna crepa visibile
- ✓ DIN EN 71-3, sicurezza dei giocattoli, migrazione di alcuni elementi, rilascio di metalli pesanti al di sotto del limite di rilevazione
- ✓ resistente alle urine, resistente al sangue, resistente al sudore



Pflege und Reinigung

Das HESS Kunstleder ist ein hochwertiges und pflegeleichtes Material. Reinigen Sie es regelmäßig für eine schöne Optik und lange Lebensdauer. Es genügt eine handwarme neutrale Seifenlauge und ein weiches flusenfreies Tuch. Je eher Sie Verschmutzungen entfernen, desto leichter lassen sie sich lösen. Tipps gegen spezielle Flecken sowie eine Liste der geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmittel finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts.

Soins et nettoyage

Le similicuir HESS est un matériau de haute qualité et facile d'entretien. Nettoyez-le régulièrement pour une belle apparence et une longue durée de vie. Une eau savonneuse neutre et tiède et un chiffon doux et non pelucheux suffisent. Plus vite vous enlevez la saleté plus il est facile de les retirer. Des conseils contre les taches spéciales ainsi qu'une liste de des agents nettoyants et désinfectants appropriés sont disponibles dans notre mode d'emploi.

Cura e pulizia

L'imitazione della pelle HESS è un materiale di alta qualità e di facile manutenzione. Pulirla regolarmente per un bell'aspetto e una lunga vita. Sono sufficienti un'acqua tiepida, neutra e saponata e un panno morbido e privo di pelucchi. Prima si rimuove la sporcizia più facilmente possono essere rimossi. Suggestioni contro le macchie speciali e un elenco di I detergenti e i disinfettanti adatti si trovano nelle nostre istruzioni per l'uso.

Schwerentflammbarkeit

Retardement des flammes / Ritardante di fiamma

EN 1021-1/2

SAE J369/MVSS302

Materialzusammensetzung

Composition des matériaux

Composizione del materiale

80.82 % PVC, 19.18 % Polyester

Dicke

Épaisseur

Spessore

1.10 +/- 0.110 mm

Breite

Largeur

Larghezza

1.37 m

Gewicht

Poids

Peso

730 +/- 50 g/m²

Rollenlänge

Longueur rouleau

Lunghezza rotolo

30 Lfm



Wenn es um die Einrichtung und Ausrüstung von Spitälern, Praxen und Pflegeheimen geht, sind wir Ihr kompetenter Partner. Vom Standard bis zur spezifischen Kundenlösung bekommen Sie alles aus einer Hand.

Beratung / Entwicklung / Verkauf / Service



HESS Medizintechnik AG

Grabenstrasse 14
CH-8865 Bilten
T +41 55 619 20 80
F +41 55 619 20 81
info@hess-med.ch
hess-med.ch

