

surgery.



**MULTILINE NEXT AC+ UND AC.
MOBILE OP- UND VERSORGLINGSLIEGEN FÜR AMBULANTE CHIRURGIE.**

**Power-Duo
für den
Einsatz im
und um den
OP!**



GREINER

surgery.



GREINER MEDBEST – MEDIZINTECHNIK MADE IN GERMANY.

GREINER stellt sich der Herausforderung, aus Wünschen von Patienten und Pflegepersonal innovative Lösungen zu entwickeln, die klinischen und wirtschaftlichen Anforderungen gleichermaßen gerecht werden. Made by GREINER heißt Made in Germany. Entwicklung und Produktion der GREINER Liegen bis hin zum Serviceangebot orientieren sich konsequent am Premiumanspruch. Dabei stützen wir uns auf Innovationsgeist, umgesetzt in vollautomatisierten Prozessen und qualifizierter Handarbeit. Hoher Anspruch in Design, Material, Technik und Ergonomie, kombiniert mit kundenorientierter Flexibilität, macht GREINER zum Partner qualitätsbewusster Kunden auf Spitzenniveau.

NEUES LIEGENKONZEPT AC+ UND AC FÜR AMBULANTE CHIRURGIE.

Ambulantes Operieren steht heute voll im Fokus. In Kliniken, OP-Zentren, MVZs und Spezialpraxen bestimmen Flexibilität, Präzision in Timing und Handling, Mobilität und Sicherheit das Bild. Zugleich geht es um Effizienz in der Raumnutzung und Wirtschaftlichkeit. Kurz: die Patienten sollten präzise in die Prozesse vor, während und nach der OP eingebunden sein. In dieser modernen Form des Klinikbetriebs machen sperrige Krankenhausbetten den Teams das Leben unnötig schwer. Gefragt sind Liegen, die mit großer Flexibilität und Stabilität Patienten in „Grün“ aufnehmen, sicher und angenehm zur OP-Schleuse transportieren, selbst als OP-Liege genutzt werden oder Umlagerung ergonomisch erlauben, und die Patienten nach der OP sicher und komfortabel in den Aufwachraum begleiten. Genau das Metier der GREINER Liegen MULTILINE NEXT AC+ und AC.

MULTILINE NEXT AC+
Mobile Transport- und
OP-Liege mit vielseitigem
klinischem Zubehör



MULTILINE NEXT AC
Mobile Transport- und
Aufwachiege mit hohem
Sitz- und Liegekomfort



MOBILE OP- UND VERSORGUNGLIEGEN.

Die MULTILINE NEXT AC+ und AC erfüllen exakt die Anforderungen, die im und um den OP heute an mobile Liegen gestellt werden. Bei Eingriffen an Kopf, Gesicht und oberen Gliedmaßen sind mit der AC+ flexible Lösungen gefragt, die Patienten im Vorfeld und während der OP komplett begleiten können. Im allgemeinen OP-Umfeld bietet dagegen die AC maximalen Komfort bis in den OP hinein bzw. für die Erholung im Aufwachraum – mit perfekter Unterstützung für ergonomisches Umlagern.

GREINER in der ambulanten Chirurgie:

- OPs in MKG-, Oral-, plastischer und dermatologischer Chirurgie, HNO, Ophthalmologie, Orthopädie u.v.m.
- OP-Vorbereitung, Ruhe- und post-operativer Aufwachraum in der Chirurgie, Untersuchung, Behandlung, Mobilisation, Transport
- Elektromotorische Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil sowie Höhe, Höhenhub bis 90 cm
- Wechselakku, Bügel, Rollen und Fahrgestell für mobilen Betrieb
- Not-Fußschalter für Trendelenburgposition, Personal hat die Hände frei
- Zuverlässige und von unabhängiger Stelle zertifizierte Produktsicherheit

Effizient,
flexibel,
stabil und
sicher im
OP!



MOBILE OPERATIONS-LIEGE MULTILINE NEXT AC+.

Die Welt im OP ist im Wandel – und mit ihr verändern sich die Liegen. Die Umsetzung integrierter OP-Workflows definiert den Bedarf an ergonomischen Allround-Lösungen, die bei voller Mobilität kein Umlagern der Patienten verlangen. Die MULTILINE NEXT AC+ entspricht exakt diesem Profil – mit kurzem Rückenteil, stabiler Patientenlagerung und -positionierung, Normschiene rundum sowie intelligent und schnell wechselbaren Kopfstützen. Leistungsfähige Motoren, gespeist von einem leistungsstarken Akku, stützen die Arbeit der OP-Teams. Ergonomischer Zugang rund um den Patientenoberkörper ist gegeben, die Ergo-Kopfstütze gibt sicheren Halt. Das intelligente Kopfstützensystem ermöglicht flexible Anpassung an jeden Bedarf.



Zero Gravity/Relaxposition



Zero Gravity/Höhenhub



Flachlage/Bettposition

MULTILINE NEXT AC+

Gemeinsam mit Chirurgen und OP-Einrichtungsspezialisten entwickelte GREINER medbest diese innovative Liege, die im und rund um den OP Maßstäbe setzt wird:

- Mobile OP-Liege mit kurzem Rückenteil und Stabilitätsverstärkung im Rücken für stabile und komfortable Patientenlagerung
- Flexibel einsetzbar für minimalinvasive Eingriffe in der plastischen und dermatologischen Chirurgie, MKG, HNO, Augenheilkunde, sowie in vielen weiteren Fachdisziplinen
- Ausgestattet mit 4 Motoren, Edelstahl-Normschiene oben, Kopfstütze Ergo mit Vario-Doppelgelenk, Zentral-arretierung der Doppel-Lenkrollen
- Vielseitiges OP-gerechtes Zubehör: Allseitig Edelstahl-Normschiene zum Andocken von klinischem Zubehör, elektrisch leitende Bezüge, Ersatz-Akku mit Wandlade-station, Arm-Hand-Chirurgie-Tisch und Göpel-Halter.
- **GREINER Kopfstützensystem:** Kopfstütze Ergo mit Vario-Doppelgelenk für Ein-Hand-Bedienung, Quick Assist Schnellkupplung für wechselbare Kopfstützen sowie individuelle Wechsellager Stretch, Voll- und Halbkalotte, jeweils mit Quick Assist Ausstattung.



GREINER MEDBEST IM OP

Wo es um Präzision geht, entscheidet das Vertrauen in die klinischen Leistungsmerkmale.

STRETCH
Verlängerung des Rückenteils
mit maximalem Komfort



VOLLKALOTTE
OP-gerechte Lagerung für den
Kopf- und Nackenbereich



HALBKALOTTE
Speziallagerung für ausgewählte
Eingriffe und kleine Patienten



MULTILINE NEXT AC+

Große Fortschritte in Ergonomie und Behandlungskomfort bringt diese Liege in den OP:


- ◆ Flexible mobile Liege, die den Anspruch an eine OP-Liege erfüllt
- ◆ Voll versenkbare Armstützen, Seite für Seite, perfekter Zugang für das OP-Team
- ◆ Elektromotorische Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil sowie Höhenhub, Not-Fußschalter für Trendelenburglage
- ◆ Stuhl-Einstieg bei 58 cm, Höhenhub in Flachlage auf 90 cm wie bei üblichen OP-Tischen
- ◆ Fußschalter und hohe Beinfreiheit rund um 12-Uhr-Position für Zugang bei Eingriffen im Kopf-, Hals- und Schulterbereich – passende GREINER Arbeitsstühle
- ◆ Kopfstützensystem mit Doppelgelenk und Schnellkupplung, stützende Mechanik für Freihand-Bedienung
- ◆ Alle Komponenten im klinischen Bereich in Edelstahl
- ◆ Perfekt für Hygiene dank großer Flächen, schnell zu desinfizieren, ohne separate Matratze



OP
Chirurgisch minimalinvasive Eingriffe an Haut und Gliedmaßen (z.B. Hand-Chirurgie) direkt an der Liege.



Kopfstützen schnell und sicher gewechselt und fixiert mit der Quick Assist Schnellkupplung

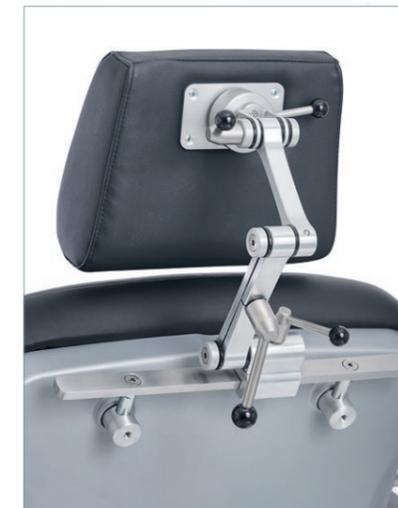

Horizontale Normschiene am Rückenteil oben zur Fixierung der gewünschten Kopfstütze



Das Vario-Doppelgelenk macht jede gewünschte Position in Sekunden erreichbar – mit einer Hand

**Komfortabel
und ergono-
misch rund
um den OP!**



Die MULTILINE NEXT AC erfüllt hier genau die Erfordernisse, die bei der stark wachsenden Zahl ambulanter Operationen an die Patientenlagerung und -mobilisierung gestellt werden.



Am Rückenteil bietet eine Traverse die Möglichkeit, eine Sauerstoffflasche (Zubehör) zu befestigen.

Handschalter mit intelligenter Bedienführung: International verständliche Symbole, Tasten mit ergonomischen und notfallgerechten Grundeinstellungen für Sitz-, Relax- und Trendelenburgposition sowie Flachlage. Sicherheit durch Magnetschlüssel-Sperre und Akkuzustandsanzeige.



Gynäkologische Positionierung – Göpel Halter an den seitlichen Normschiene, Verfahrweg der Patientin stufenlos in Höhe und Neigung.



MOBILE OP- UND VERSORGUNGLIEGE MULTILINE NEXT AC.

In der OP-Vorbereitung und im Aufwachraum liegt der Schwerpunkt dieser mobilen Liege, die in vielen Kliniken als Ruhe- und Aufwachliege zum Einsatz kommt. Ideale Einsatzorte sind die OP-Vorbereitung, die Wege zum und vom OP, die Lagerung nach dem Eingriff und der Aufwachraum nach der Narkose: Ergonomie, Funktionalität, Beweglichkeit und Patientenkomfort verbinden sich zu dieser einzigartigen Lösung aus Stuhl und Liege. Ein leistungsstarker Akku und leistungsfähige Motoren überzeugen bei der Arbeit der OP- und Pflegeteams. Perfekter Zugang und einfache Desinfektion überzeugen in der Hygiene. Und auch dort, wo klassische Klinikbetten in kritischer Situation keinen Platz finden, ist MULTILINE NEXT AC auf engstem Raum zur Stelle.

Die MULTILINE NEXT AC bietet hohen Sitz- und Liegekomfort in jeder Lage. Von der Sitz- und Relaxposition über die Bettflachlage bis zur notfallgerechten Trendelenburgposition verfährt sie schnell und sanft per Tastendruck in jede gewünschte oder erforderliche Position.



Sitzposition



Zero Gravity/Relaxposition



Bettposition




Trendelenburg- und Schockposition



Einstieg patientengerecht bei 58-90 cm Höhe



Zentralarretierung/Geradeauslauf

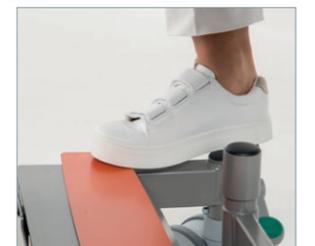

Notfall-Fußschalter



12,5 cm Laufrollen, perfekt mobil



Perfekter Zugang zum Akku

MULTILINE NEXT AC+

Hygiene

Einhaltung schärfster Richtlinien, perfekter Zugang, sauberer Flächenabschluss, geprüfte Oberflächen, Minimum an Nähten

Sitz- und Liegekomfort
Komfortable, 60 cm breite Polsterauflage für Patienten von Größe und bis zu 220 kg Gewicht

Minimaler Platzbedarf
Echte Stuhlposition mit 90° Neigung des Beinteils – perfekt für den Einstieg bei 58 cm Höhe

Richtungweisend

Ein Rad einstellbar für perfekte Mobilität beim Geradeauslauf



Kopfstützen nach Wahl

Ergo, ohne/mit Vario-Doppelgelenk, Quick Assist Schnellkupplung, Wechsepolster sowie Voll- und Halbkalotte für Quick Assist

Fixierung

Umlaufendes Normschienensystem aus Edelstahl an den Rücken- und Seitenteilen

Ergonomie

Spaltfrei bündige Polsterauflagen sowie fixier- und versenkbare Armauflagen für direkten Zugang und einfache Umlagerung

Stabilität

Hohe Belastung bis 220 kg, sicheres Handling beim Patiententransport

Mobilität

12,5-cm-Lenkrollen für komfortable Fahrwege, zentrales Bremssystem




Kopfstütze Ergo mit Vario-Doppelgelenk



Wechsepolster Stretch für Quick Assist



Kopfstütze Vollkalotte für Quick Assist

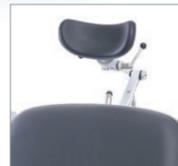

Kopfstütze Halbkalotte für Quick Assist



Wechsel mit Quick Assist Schnellkupplung



Jede Position mit Vario-Doppelgelenk fixierbar



Armstützen vollständig versenkbar



Normschienen für klinisches Zubehör



Göpel-Halter für die Gynäkologie



Patiententisch fixier- und schwenkbar



Fußschalter für ergonomische Frei-Hand-OP



Ersatzakku an der Wandladestation

MULTILINE NEXT AC

Hygiene

Einhaltung schärfster Richtlinien, perfekter Zugang, sauberer Flächenabschluss, geprüfte Oberflächen, Minimum an Nähten

Sitz- und Liegekomfort

Komfortable, 60 cm breite Polsterauflage für prä- und postoperative Warte- und Aufwachzeiten

Patiententisch

Schnell und handlich mit separatem Halter fixiert

Minimaler Platzbedarf

Echte Stuhlposition mit 90° Neigung des Beinteils – perfekt für den Einstieg bei 58 cm Höhe

Richtungweisend

Ein Rad einstellbar für perfekte Mobilität beim Geradeauslauf



Flexibilität

Infusionsstangenhalter schwenkbar mit nur einer Hand nach links und rechts

Ergonomie

Spaltfrei bündige Polsterauflagen sowie fixier- und versenkbare Armauflagen für einfache Umlagerung vor und nach der OP

Stabilität

Hohe Belastung bis 220 kg, sicheres Handling beim Patiententransport

Mobilität

12,5-cm-Lenkrollen für komfortable Fahrwege, zentrales Bremssystem



Kopfpolster Relaxkissen oder Nackenrolle



Gummierter Schub-bügel



Infusionsstange im schwenkbaren Halter



Armstützen vollständig versenkbar



Patiententisch am seitlichen Halter



Patiententisch beim Transport am Rücken



Normschienen für klinisches Zubehör



Göpel-Halter für die Gynäkologie



Sauerstoffflasche im Halter am Rückenteil



Fußschalter für ergonomische Frei-Hand-OP



Ersatzakku an der Wandladestation



Wahl der Polster und Kissen nach Farbkarte

MULTILINE NEXT AC+ – Ausstattung / Zubehör

- Ausführung mit kurzem Rückenteil und Kopfstütze Ergo mit Vario-Doppelgelenk, Normschiene aus Edelstahl oben, 4 Motoren für die Funktionseinstellung, Zentralarretierung, Hochleistungs-Akku, Fußschalter/Notschalter, alle Kunststoffblenden und -abdeckungen in Weiß.

Zubehör

- Polsterbezüge in Premiummaterial nach Farbkarte
- Elektrisch leitende Bezüge EL11 (schwarz)
- Kopfstützen und Wechsepolster
- Normschienen aus Edelstahl
- Ersatzakku und Wandladestation
- Infusionsstange und schwenkbarer Halter
- Patiententisch
- Doppel-Fußschalter
- Göpel-Halter mit Befestigungskolben
- Arm-Hand-Chirurgie-Tisch

Maße und technische Daten

• Stuhlposition (Stellfläche)	107 x 77 cm
• Liegeposition (Stellfläche)	200 x 77 cm
• Gesamtbreite	77 cm
• Liegefläche (L x B)	193 x 60 cm (inkl. Kopfstütze)
• Stärke Liegefläche	9 cm
• Armlehne (L x B)	73 x 7 cm
• Einstiegshöhe	58 cm
• Höhenverstellung	32 cm (58 – 90 cm)
• Rollendurchmesser	12,5 cm (1 x richtungsweisend)
• Rücken	- 5° bis 78°
• Sitzteil	0° bis 22°
• Beinteil	0° bis 90°
• Maximales Patientengewicht	220 kg
• Spannung	100-240 V/50-60 Hz
• Akku Leistung	24 V DC, 1 x 2,9 Ah, (bis zu 40 Hübe)
• Gewicht Liege	128 kg

MULTILINE NEXT AC – Ausstattung / Zubehör

- Ausführung mit 4 Motoren für die Funktionseinstellung, Zentralarretierung, Hochleistungs-Akku, Fußschalter/Notschalter, alle Kunststoffblenden und -abdeckungen in Weiß.

Zubehör

- Polsterbezüge in Premiummaterial nach Farbkarte
- Elektrisch leitende Bezüge EL11 (schwarz)
- Kissen und Kopfpolster
- Normschienen aus Edelstahl und Zubehörtraverse
- Ersatzakku und Wandladestation
- Infusionsstange und schwenkbarer Halter
- Patiententisch
- Sauerstoffflaschenhalter für Zubehörtraverse
- Doppel-Fußschalter
- Göpel-Halter mit Befestigungskolben
- Arm-Hand-Chirurgie-Tisch

Maße und technische Daten

• Stuhlposition (Stellfläche)	107 x 77 cm
• Liegeposition (Stellfläche)	200 x 77 cm
• Gesamtbreite	77 cm
• Liegefläche (L x B)	200 x 60 cm
• Stärke Liegefläche	9 cm
• Armlehne (L x B)	73 x 7 cm
• Einstiegshöhe	58 cm
• Höhenverstellung	32 cm (58 – 90 cm)
• Rollendurchmesser	12,5 cm (1 x richtungsweisend)
• Rücken	- 5° bis 78°
• Sitzteil	0° bis 22°
• Beinteil	0° bis 90°
• Maximales Patientengewicht	220 kg
• Spannung	100-240 V/50-60 Hz
• Akku Leistung	24 V DC, 1 x 2,9 Ah, (bis zu 40 Hübe)
• Gewicht Liege	128 kg



we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.



Prüfzeichen für
Qualitätsmanagement-System



GREINER GmbH
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de