



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

Zum Shop



RÖNTGENLIEGE / C-BOGENLIEGE SWISSTROLL® X «PUMP», HYDRAULISCH

Unverwüstliche Röntgenliege / C-Bogenliege mit dem klugen Plus an Funktionalität

Art-Nr: H06-607



TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbereich
60 - 100 cm

Verstellbereich Rückenteil
0 - 70 °

Liegefläche
205 x 73 cm

Doppellenkrollen
Ø 125 mm

Max. Patientengewicht
250 kg

Röntgenfenster
60 x 165 cm

Gesamtmasse
234 x 90 cm

Trendelenburgposition
+ / - 15 °

Medizinprodukt
Class I

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Röntgenliege / C-Bogenliege Swisstroll® X ist ein echter Allrounder und modular aufgebaut. Wählen Sie zwischen elektrischem oder hydraulischem Antriebssystem und ob die Liege mit einem Seitengitter und Geräteschiene ausgerüstet sein soll. Die solide und hochwertige U-Basis (U-Shape) in Verbindung mit der elektrischen Höhenverstellung, macht den Zugang mit dem C-Bogen besonders einfach. Aufgrund des grossen Röntgenfensters muss der Patient nicht mehr umpositioniert werden. Die elektrische Höhen-, Trendelen- und Antitrendelenburgverstellung erfolgt mittels

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Bedienung**
mittels Fusspedal (kopf- und fussseitig)
- **Rollentyp**
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutz elektrisch leitend
- **Fahrwerk**
mit Richtungsfeststeller und achsweise Blockierung
- **Liegefläche**
röntgendurchlässig mehrteilig
- **Rückenteil**
leichtgängig verstellbar mittels Gasfederunterstützung
- **Höhenverstellung**
hydraulisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatz mittels hydraulischer Präzisionspumpe
- **Seitengitter**
optional
- **Konstruktion**
U-förmige Basis für einfachen Zugang mit einem C-Bogen
- **Wandabweiser**
Wandabweiser und Einstecklöcher für Zubehör an allen 4 Ecken
- **Kompatibilität**
nur bedingt kompatibel mit konventionellem Röntgen
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Rahmenfarbe**



Handscharter. Optional kann die C-Bogenliege mit bis zu drei Fusschartern ausgestattet werden. Die neuste Antriebstechnologie mit Softstart für eine ruckfreie Höhenverstellung steigert das Wohlbefinden Ihres Patienten - Die elektrische Verstellung erfolgt absolut ruckfrei und schnell. Die Röntgenliege ist optional mit einem Rückenteil an Kopf und Fussende erhältlich, so müssen Sie sich bei der Platzierung des Patienten keine Gedanken machen wo hinten und vorne ist. Standardmässige Wandabweisen schützen nicht nur die Röntgenliege, sondern auch andere Infrastrukturen. Die C-Bogenliege verfügt über ein optionales Fahrwerk mit Zentral-Total-Blockierung, die Bedienung ist von allen Seiten uneingeschränkt gewährleistet. Ohne die Option «Fünftes Rad /5. Wheel», wird die Liege mit einem richtungsfeststellenden Rad geliefert. Die hochwertigen und grossen Doppellenkrollen machen die Liege nicht nur zu einer Röntgenliege, sondern auch zu einem Notfallstretcher. An allen 4 Ecken der Liege kann zum Beispiel ein Infusionsständer oder ein Monitorhalter angebracht werden. Mit der Option «Akku», ist es möglich den Stretcher vollkommen autark zu betreiben. Überzeugen Sie sich von dieser hochwertigen und multifunktionellen Liege!





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



RÖNTGENLIEGE / C-BOGENLIEGE SWISSTROLL® X «PUMP», HYDRAULISCH

Unverwüstliche Röntgenliege / C-Bogenliege mit dem klugen Plus an Funktionalität

Art-Nr: H06-607

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Röntgentisch SwissTroll® X One

H06-611-SET1



HESS Röntgenliege / C-Bogenliege SwissTroll® X, elektrisch

H06-603




Hygienesäule mit Desinfektionsmittelpender H.U.G.O.

H06-611


ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop

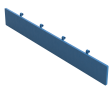

Polster für Seitengitter

H06-558.027

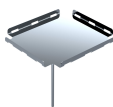

Defibrillator Tablett

H06-558.026



Sauerstoffflaschenhalterung

H06-558.025



Utensilien- / Wäschekorb

H06-558.024




HESS Stretchermatratze Soft

H06-558.014



Infusionsstange höhenverstellbar

H12-311

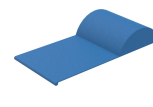

Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01



Infusionsstange höhenverstellbar

H06-561.003



Halterung für Infusionsstange

H06-561.004



Mobiler Andockwagen «Provi-Dock»

PR-IDOCK410



Mobiler Andockwagen «Provi-Dock»

PR-IDOCK510



Mobiler Andockwagen «Provi-Dock»

PR-IDOCK610

