



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



THERAPIELIEGE MULTIPRO® NEXT 6 «PUMP» MIT HYDRAULIKPUMPE

Die Therapieliege für umfassende Behandlungen

Art-Nr: H06-132



TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse
205 x 65 cm

Polsterdicke
6 cm

Höhenverstellbereich
46 - 98 cm

Verstellbereich Rückenteil
+75 bis -20 °

Verstellbereich Gesichtsteil
+35 bis -25 °

Knieknick
30 °

Doppellenkrollen
Ø 75 mm

Max. Patientengewicht
200 kg

Trendelenburgposition
bis -15 °

Medizinprodukt
Class I

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

FARBEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ob klassische Massage oder Physiotherapie: Entscheidend ist allein, welche Anwendungen Sie anbieten möchten. Diese Therapieliege wird Ihren Ansprüchen in jedem Fall gerecht werden. MultiPro 6 zeichnet sich durch höchsten Komfort für alle Beteiligten aus - den Therapeuten und die zu behandelnde Person. Sämtliche verstellbaren Polsterteile sind von beiden Seiten aus bedienbar und werden von einer Gasdruckfeder unterstützt. Ergonomisch perfekt an den Körper anpassbar ist

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste medizinische Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutz
- **Untergestell**
silberionenbeschichtetes HPL-Cover
- **Liegefläche**
6-teilig
- **Rückenteil**
mit ergonomischem Gesichtsausschnitt inkl. Polstereinlage! und stufenlos verstellbaren Armauflagen
- **Gesichtsteil**
kraftunterstützt und stufenlos verstellbar
- **Armauflagen**
einhändig stufenlos verstellbar
- **Knieknick**
leichtgängig verstellbar mittels Gasfederunterstützung
- **Höhenverstellung**
mittels hydraulischer Präzisionspumpe hydraulisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatz extra tiefer Einstieg, ideal für Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen



diese Therapieliege die Grundlage jeder
erfolgreichen Behandlung.

- **Fusskonstruktion**
grosse, bodenschonende Standfussflächen
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Bremssystem**
zentrales HESS-Bremssystem «Push-to-Stop», intuitiv und bedienerfreundlich
- **Rahmenfarbe**
RAL 9016 verkehrsweiss





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



THERAPIELIEGE MULTIPRO® NEXT 6 «PUMP» MIT HYDRAULIKPUMPE

Die Therapieliege für umfassende Behandlungen

Art-Nr: H06-132

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Therapieliege MultiPro® next 6 «eco» mit Fusstaste

H06-131



Therapieliege MultiPro® next 6

H06-130


ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Frottéfixleintuch für Patientenliegen

H06-540.01

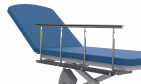


Seitengitterpaar für Patientenliegen mit Geräteschiene

H06-544



Armtisch gepolstert, fixe Höhe

H06-510.001

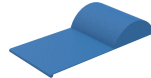

Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01



Infusionsstange höhenverstellbar

H06-561.003



Halterung für Infusionsstange

H06-561.004



Polsterschutzmatte für Multipro®

H06-529.03

